

「くり～んフラッシュ」を使用した バック交換手順書

2014年04月27日作成
2020年01月27日改訂

1. 必要物品の準備



透析液




くり〜んフラッシュ



下敷き 保温カバー



ウェットティッシュ

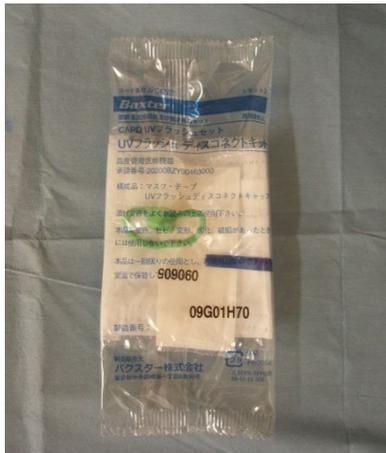

ディスコネクトキット



スタンド



はかり



記録ノート・ペン



アルコール
消毒


2. 身の回りの確認

- 爪は長くないですか？
- 腕時計など手首にはめていないですか？
- 指輪など外せるものはないですか？
- 袖が手首などにかからないようにまくれますか？
または、袖は短くできますか？

3. 空調・換気扇を止める



4. テーブルをふく

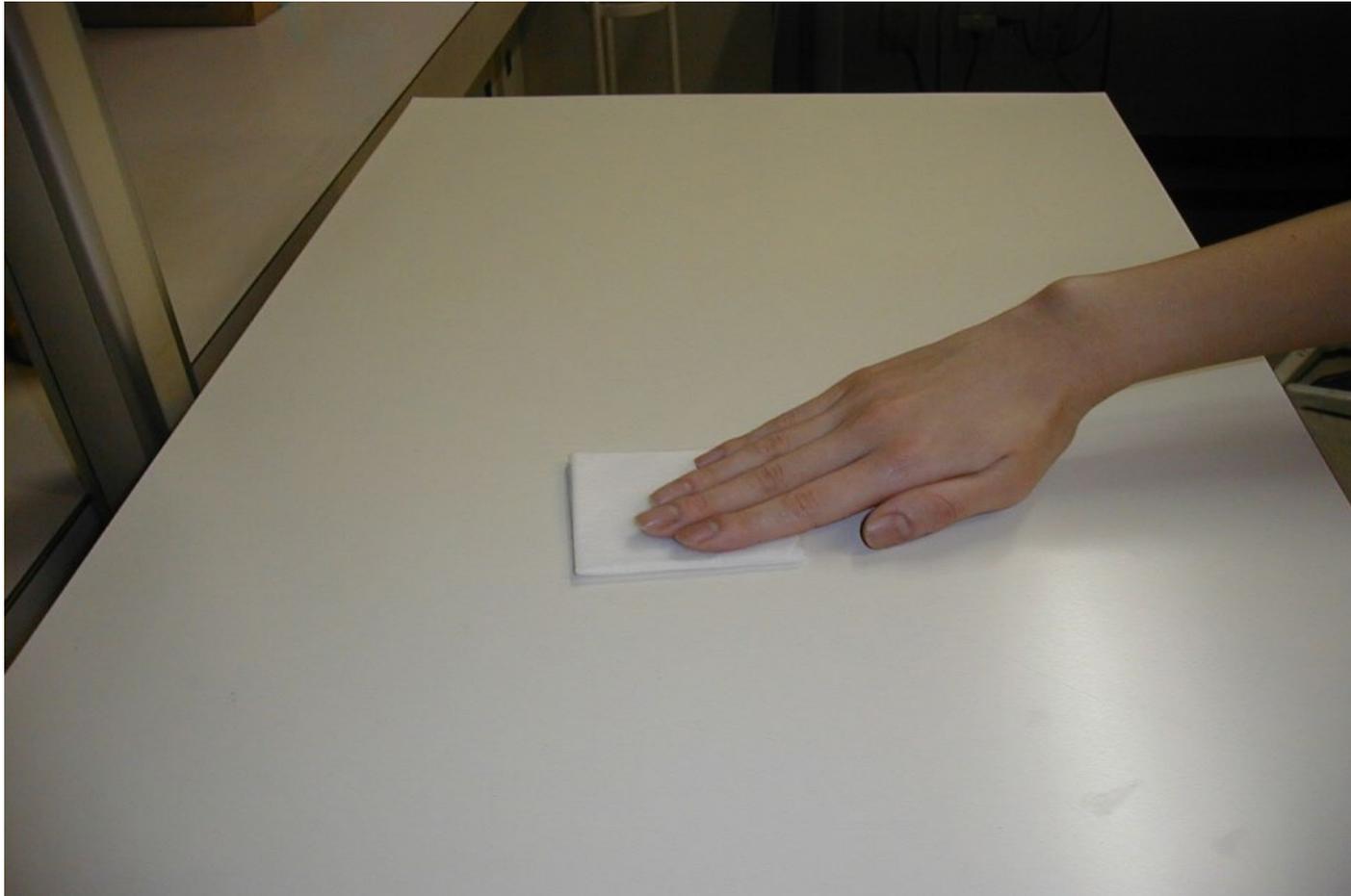

5. 手洗い手順表に沿って手を洗う




腕時計は外して手首まで出す



手を拭いた後のペーパーで
水栓を閉める

6. キットからマスクを取り出し 鼻まで装着する

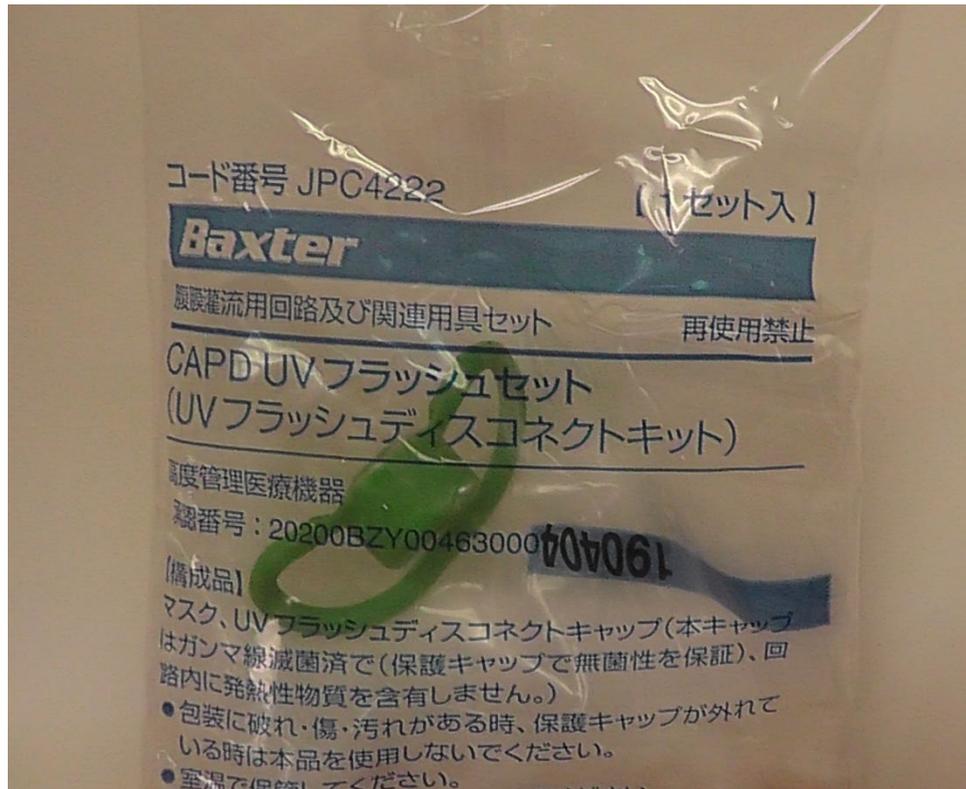

キャップセットの名前
(UVディスクコネクタキット)


開封前に破損ないか
チェックしてください！

7. 透析液の内容を確認する

1) 濃度・内容量確認

破損ないかチェック！

2) 使用期限の確認

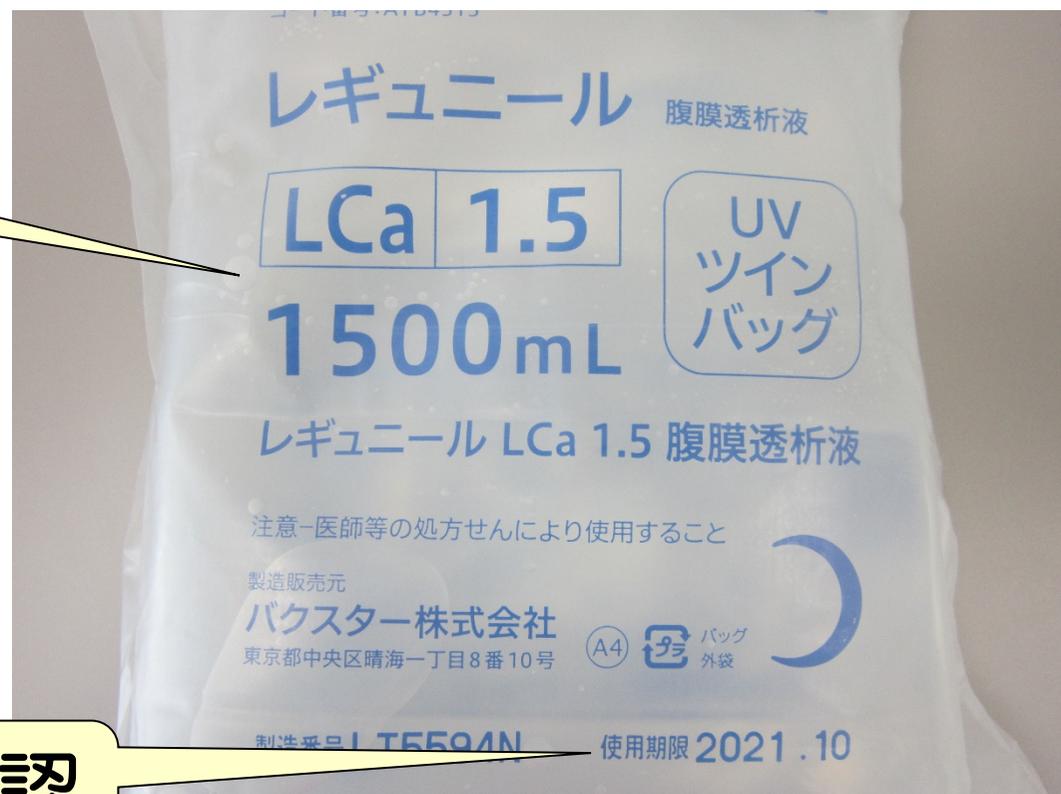

8. 袋を開封する


袋がくっついているので手を入れてはまず



9. 青と白のクランプを閉じる

この部分が
一番きれい！
床に落とさない
ように注意！




青と白を両方とも
15cmくらい
下にずらす

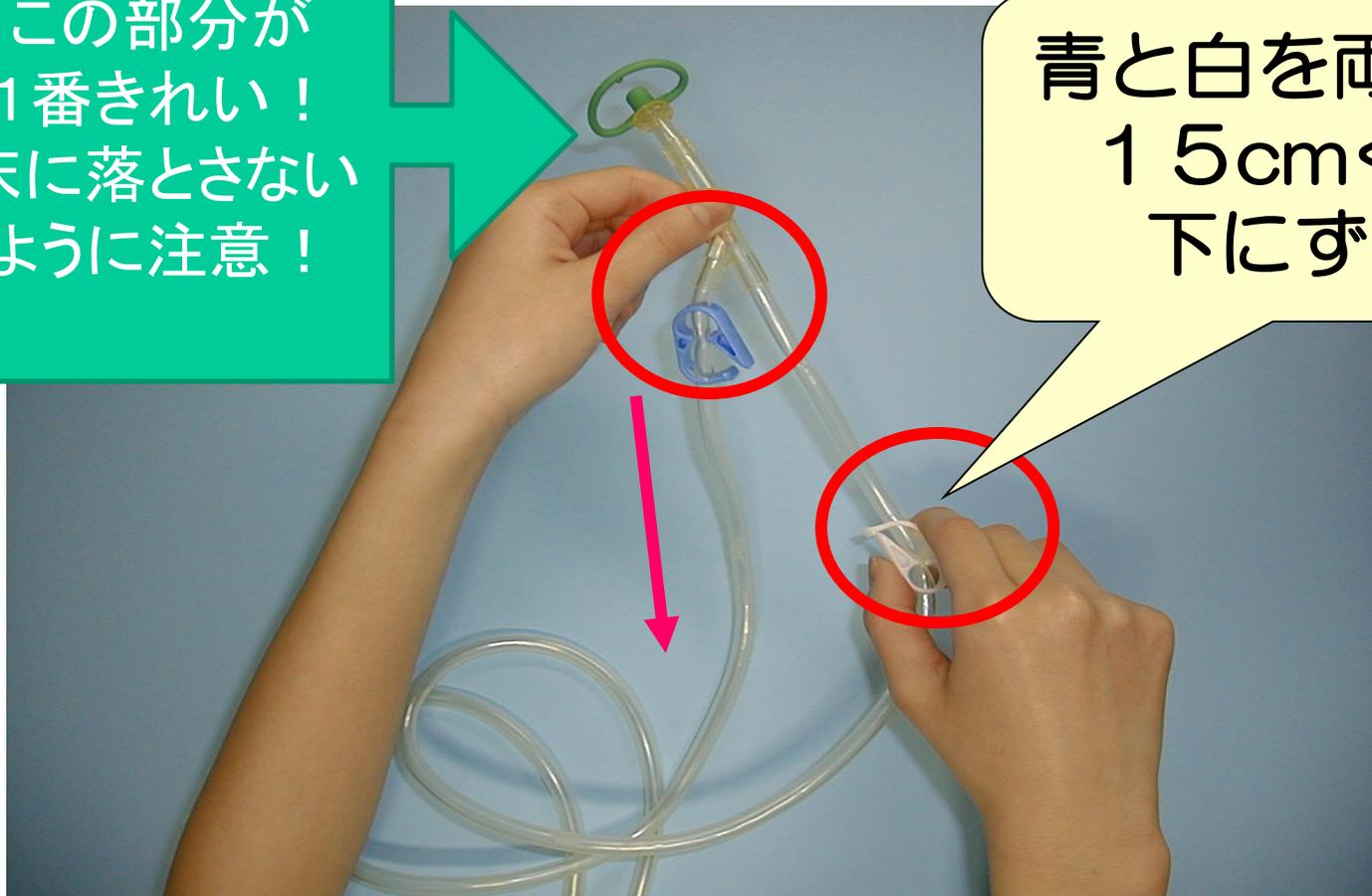

10. 排液バックをかごに置く



11. 巻きながら隔壁開通を 2回行う

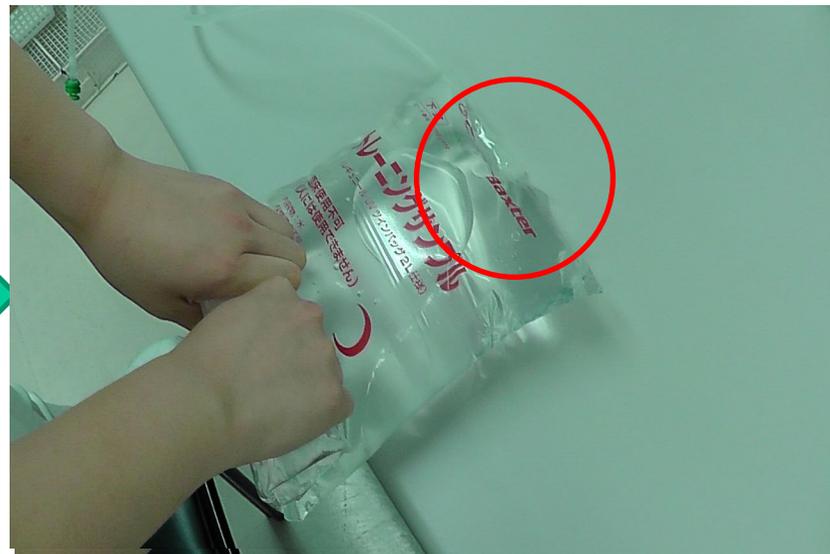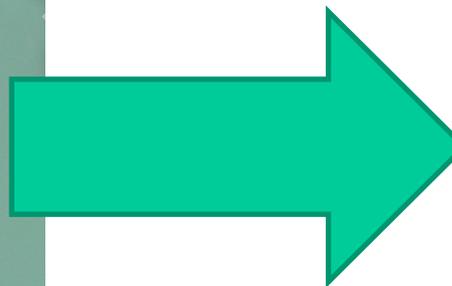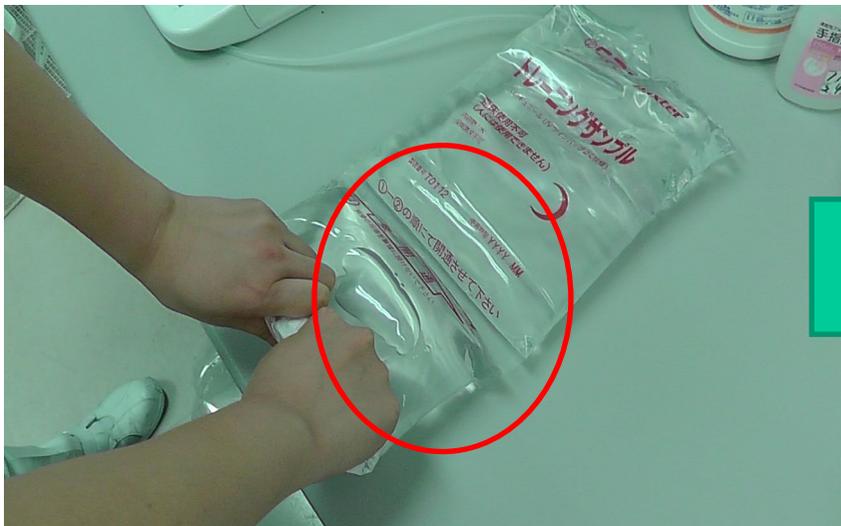

液がルートに出ていますか？



12. 赤いシールを剥がす



必ず隔壁開通した
後に！！

13. 液を保温カバーに入れる



14. お腹からチューブを取り出し 緑色の保護カバーを外す

きれいな部分です！
床に落とさないように！



接続

15. くり～んフラッシュの 電源を入れる



2秒以上
長押し


16. 手指のアルコール消毒をする



15秒ほど手に
擦り込む

※何かに触れた後も消毒を行いましょう
(髪の毛など・・・)

17. ふたを開ける

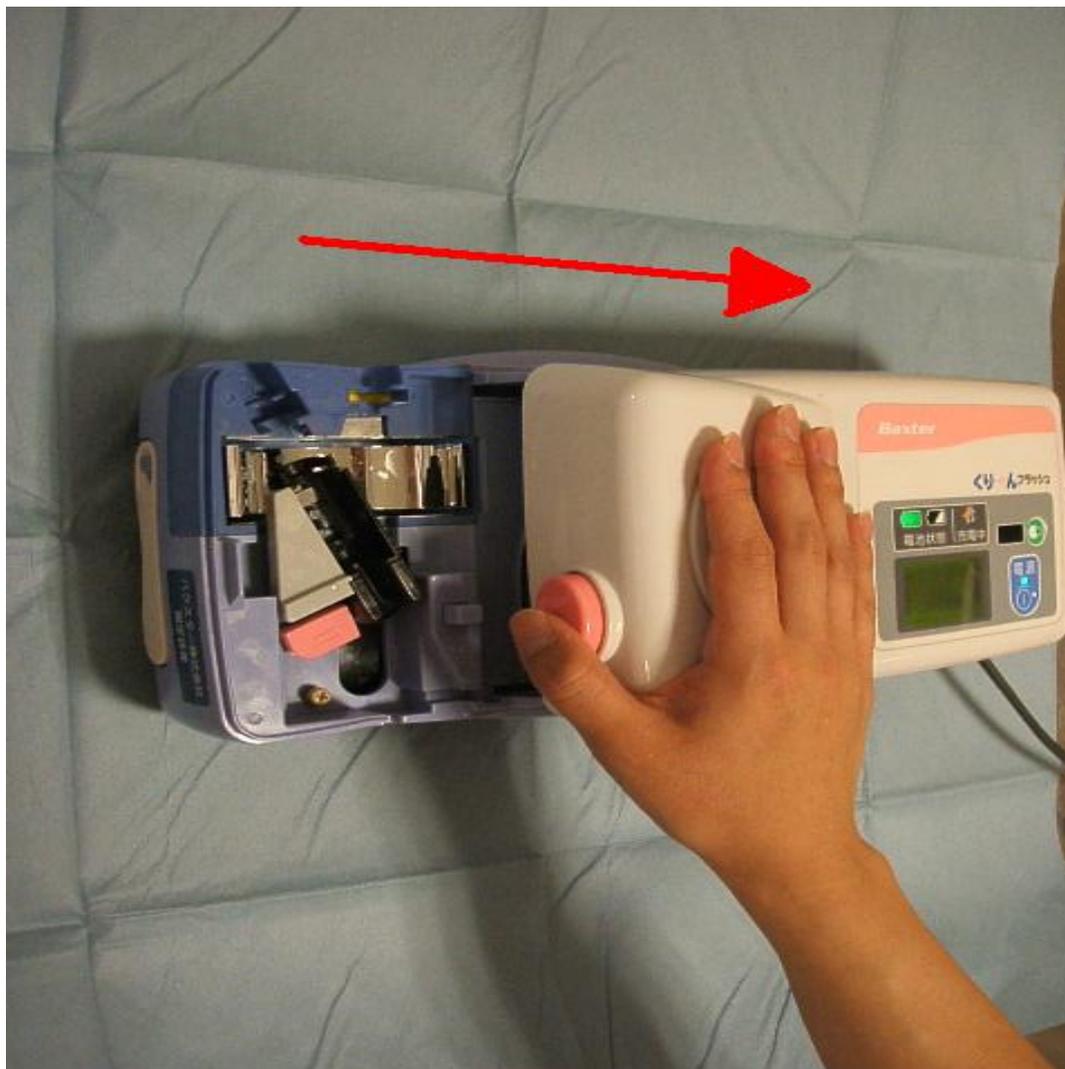


18. 左溝にお腹のチューブを入れる




19. 右溝に透析液のつばの部分を入れる

手で押さえつつ
ふたを閉める

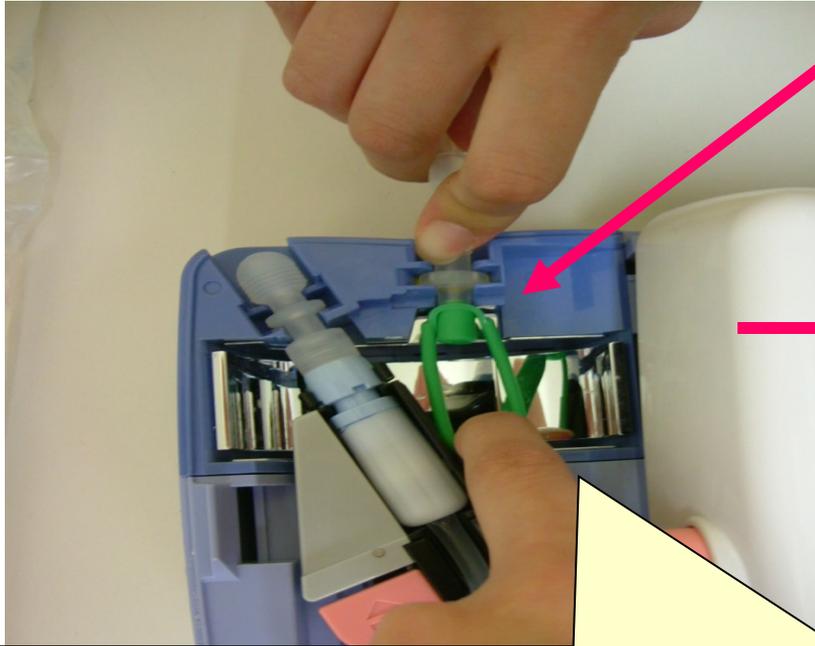


緑のキャップをとる

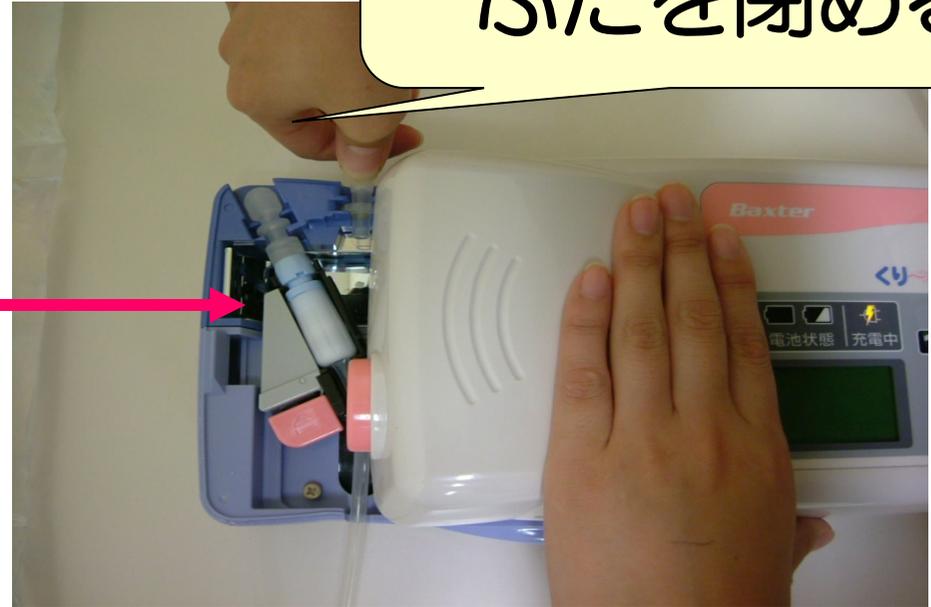

ふたを閉じると照射が始まる

20. ふたを開け、お腹のチューブを 取りだす

キャップは
捨てる

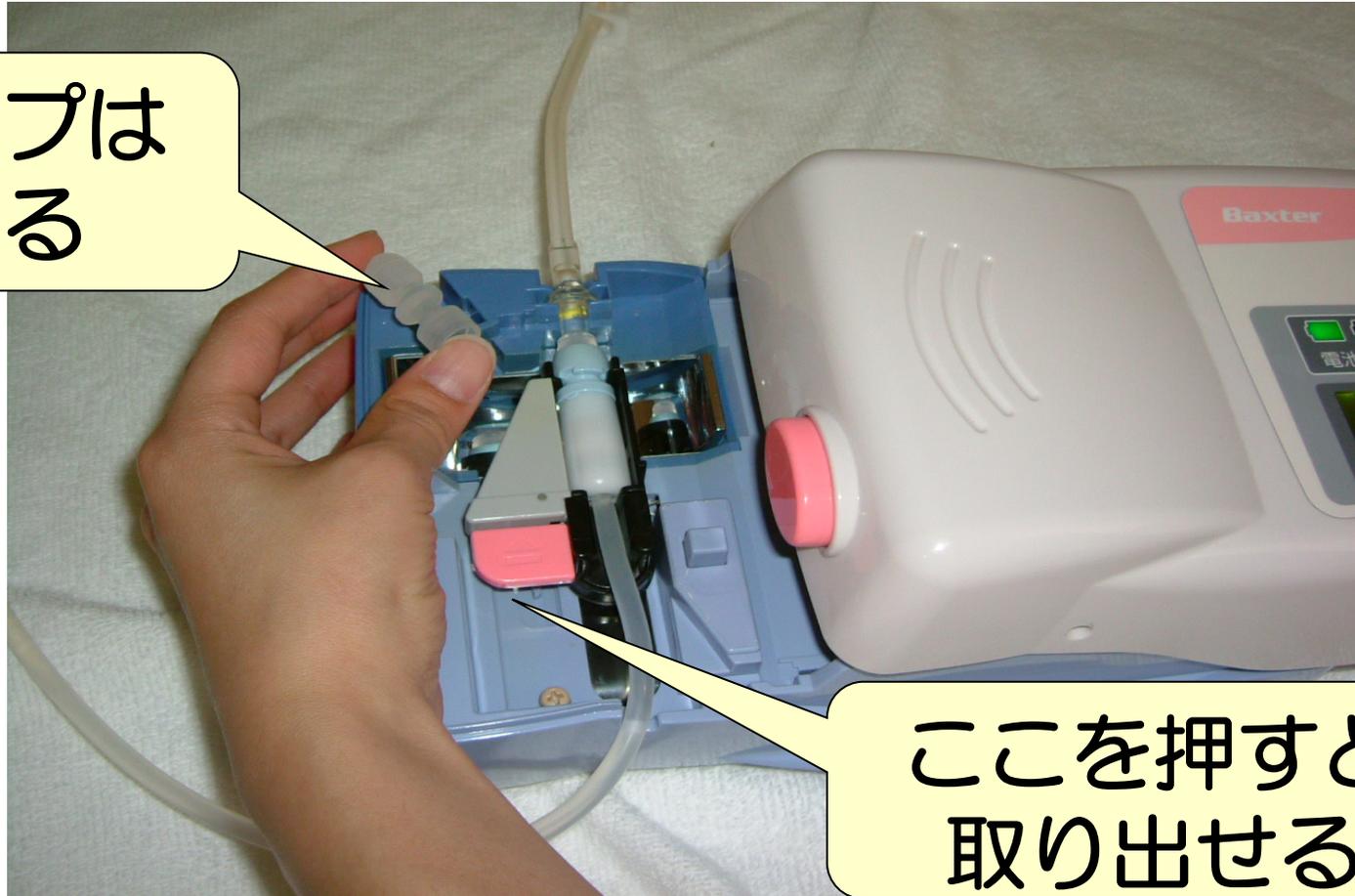

ここを押すと
取り出せる

21. ふたを閉めて電源を切る



22. 緑色の保護カバーをつける



排液


23. 白いクランプを開ける



排液

25. 現在排液中

おなかの液をだしている

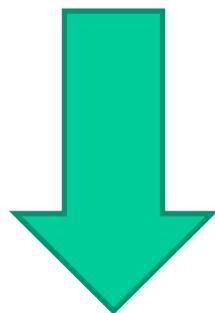

液がでなくなるまで待つ
(最低10分程度)

液が出なくなったら

26. お腹のチューブのクランプを 回して閉める



カチッと
音がするまで
閉める

27. 白のクランプを閉める



排液の終了時間確認
排液時間（何分か）をノートに記載

28. 排泄液の色を確認し量を測定・記録



フィブリンないかな？
赤くないかな？
濁ってないかな？



白く濁っていたらすぐに
病院に電話をしましょう


29. 排液バックをかごに戻す



30. 液の量を量る



31. 白と青のクランプを開ける

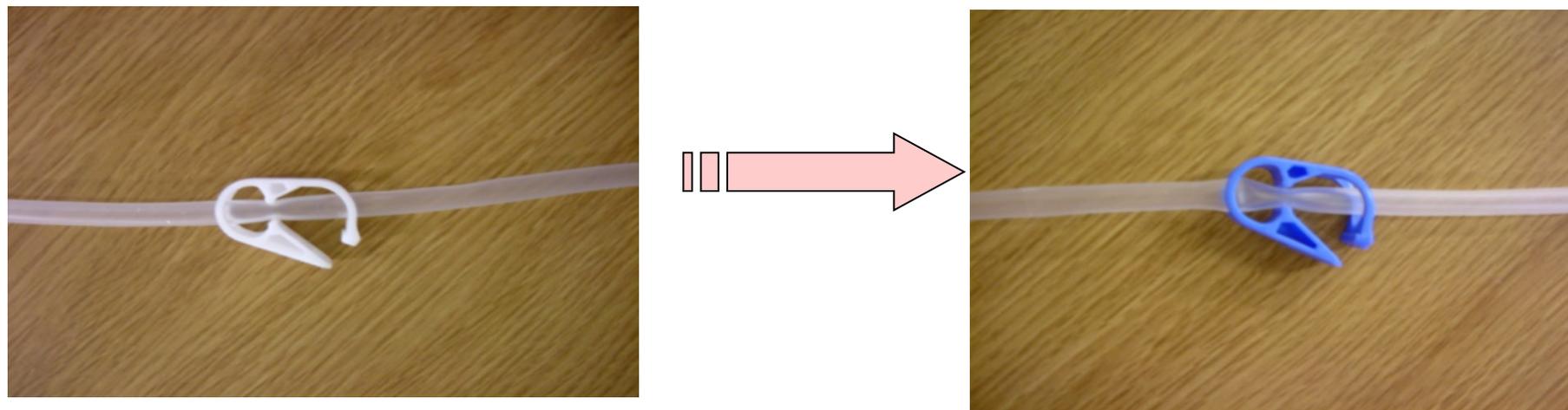

クランプを開いたら
すぐ次ページへ


32. チューブを指でポンポンとはじき
チューブの空気を流し、
決められた量まで液を流す



**この部分に空気が
たまっている**

決められた量になったら

33. 青と白のクランプを閉じる

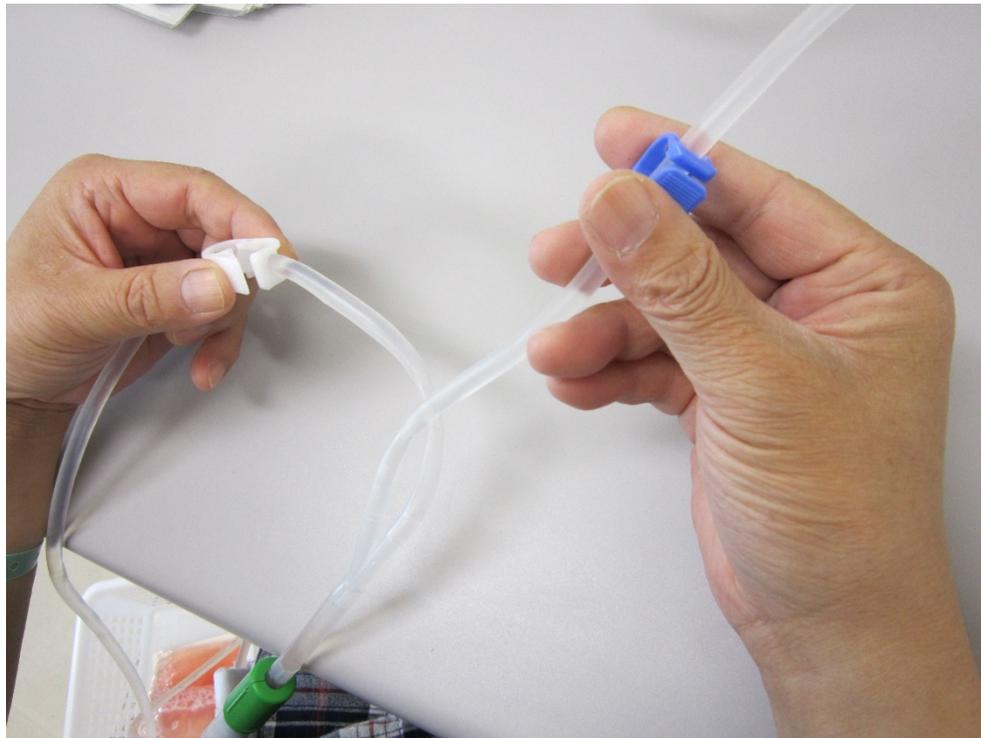


34. 液をスタンドの上部に掛ける




注液

35. 青のクランプ開ける

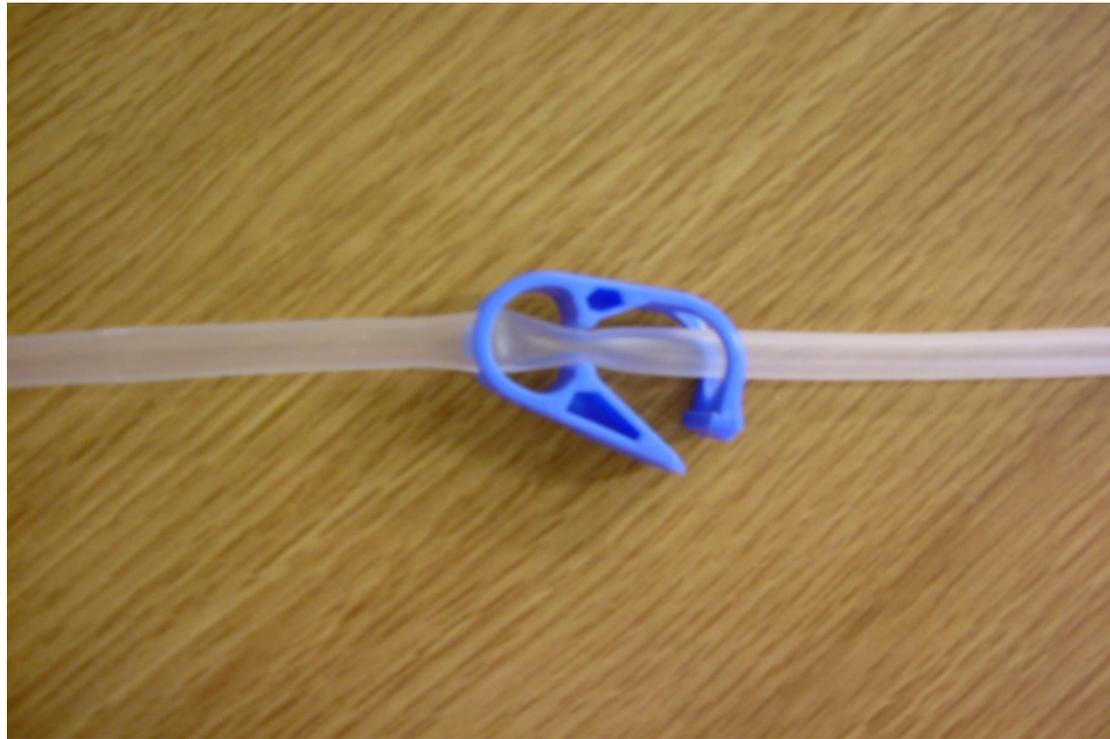

注液

36. お腹のチューブのクランプを回して開ける

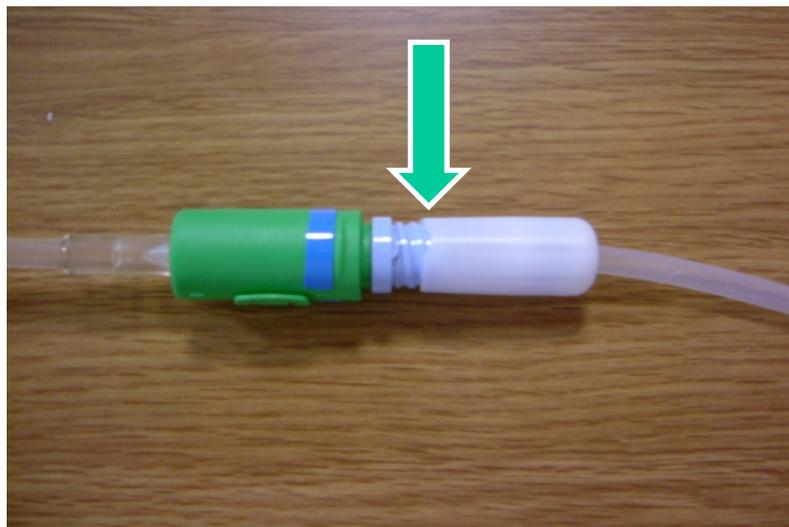

お腹に液が入り始めます！

注液

37. 現在注液中


おなかに液を入れている




液が入るまで待つ
入ったら次のページへ

液が全部入ったら

38. お腹のチューブのクランプを 回して閉じる

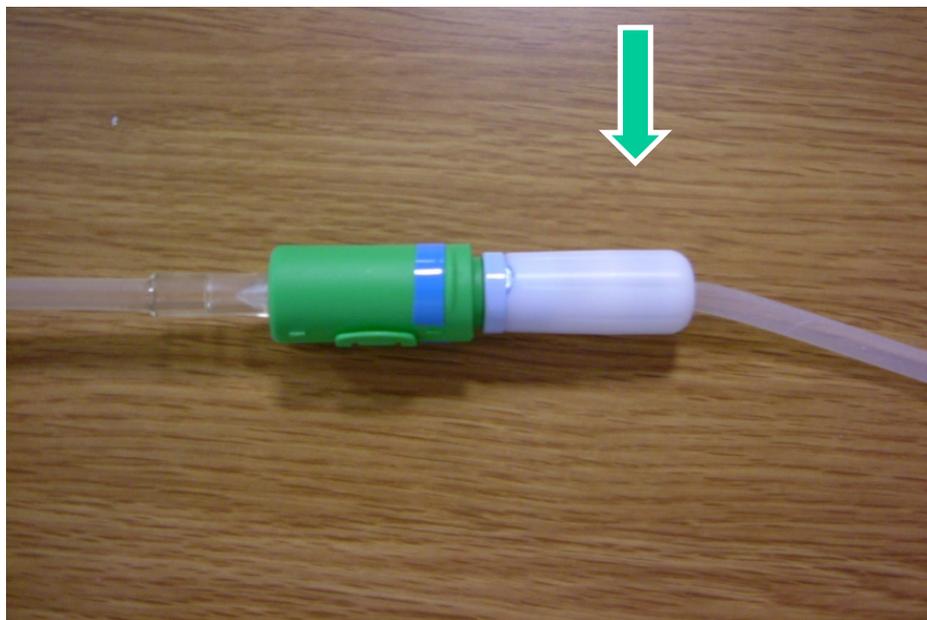

39. 青のクランプを閉じる

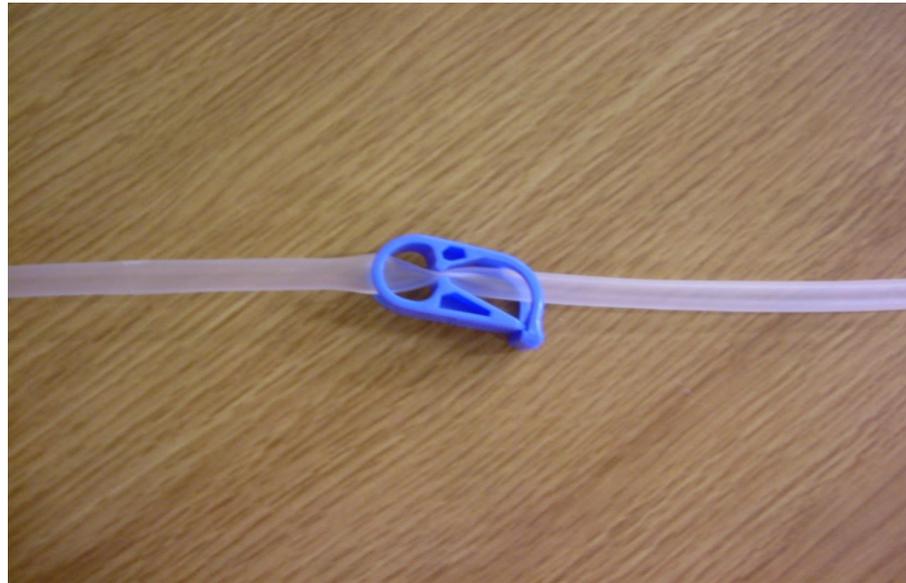

注液終了の時間を確認して
ノートに時間を記載する

40.

空になった袋を
スタンドから外
し机の上におく




袋をおいたら

次ページへ



41. 緑色の保護カバーを外す

きれいな部分です！
床に落とさないように！

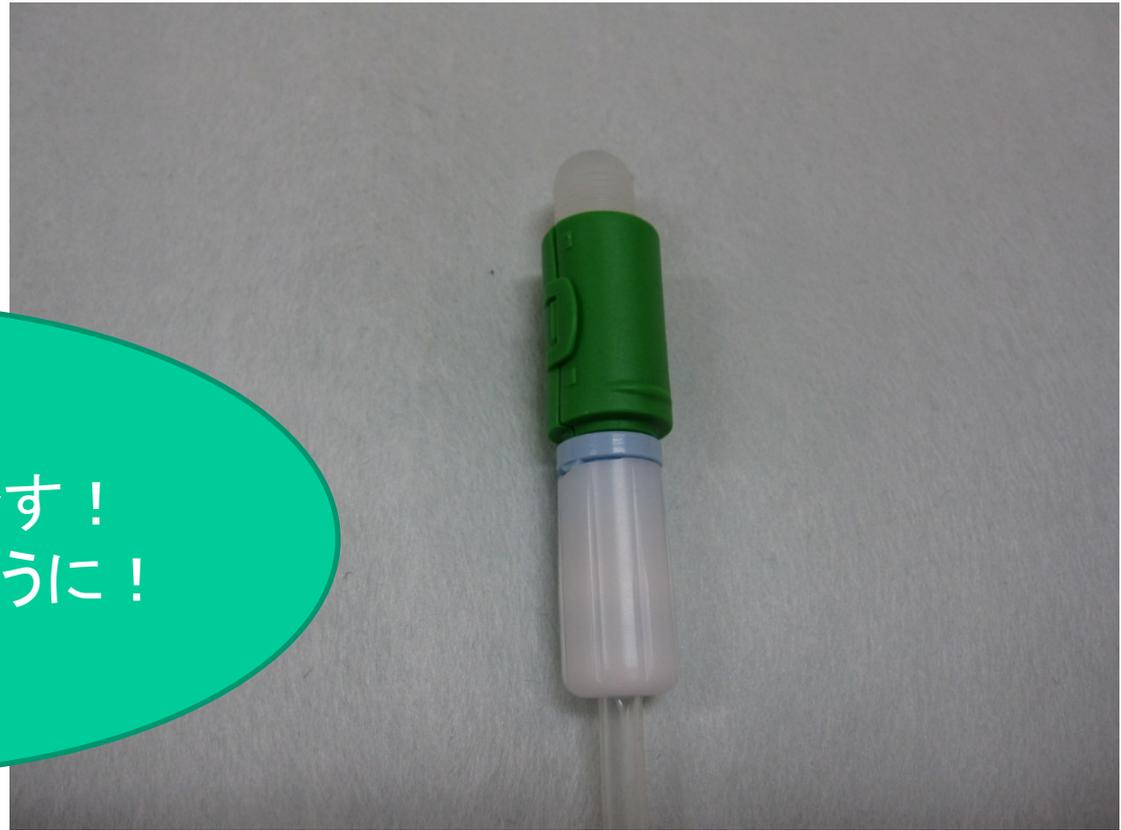

切り離し

42. くり～んフラッシュの 電源を入れる




43. 手指のアルコール消毒をする



15秒ほど手に
擦り込む

※何かに触れた後も消毒を行いましょう


44. ふたを開ける

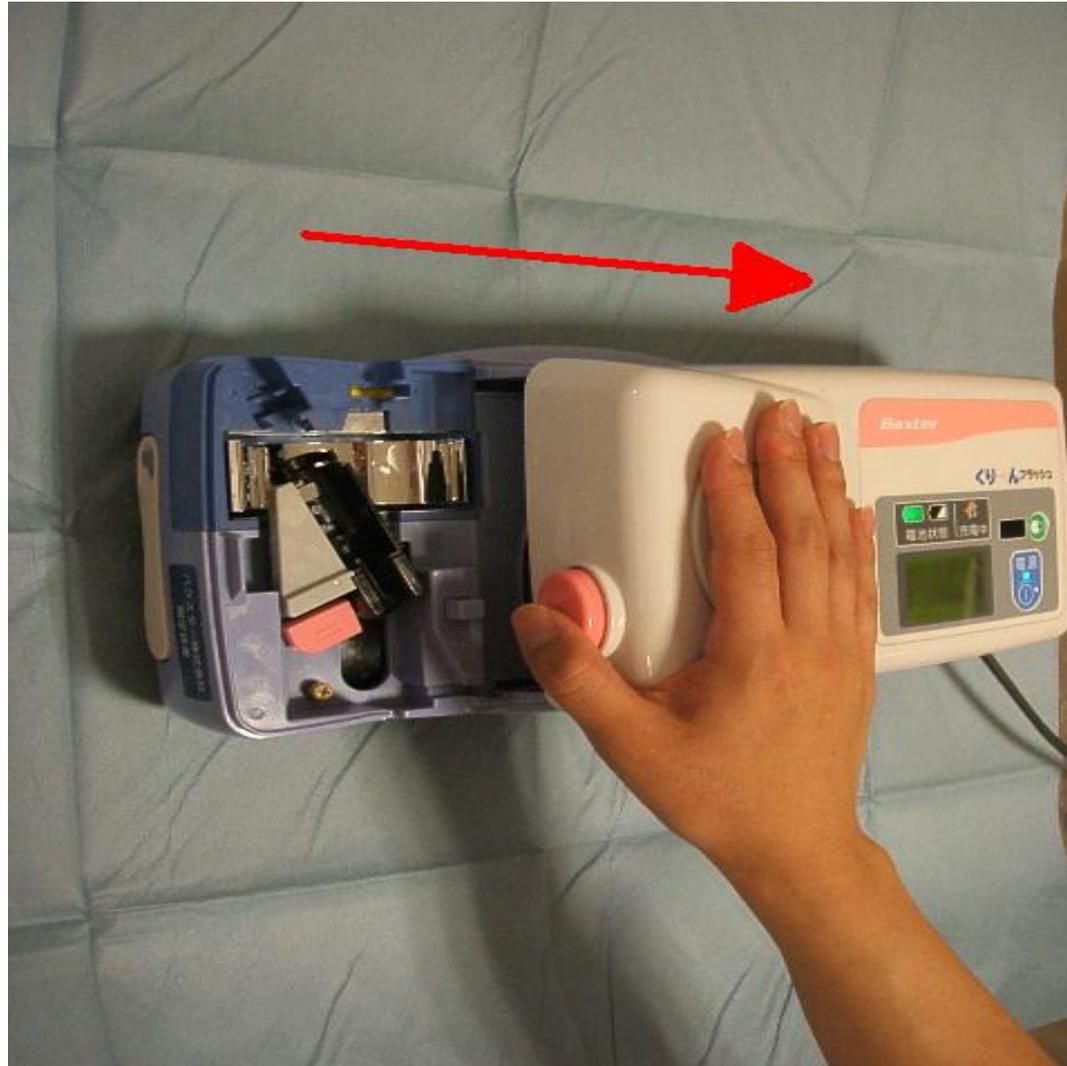

45. 左溝にお腹のチューブ

右溝に**キャップ**を入れる

緑のキャップ
を取る

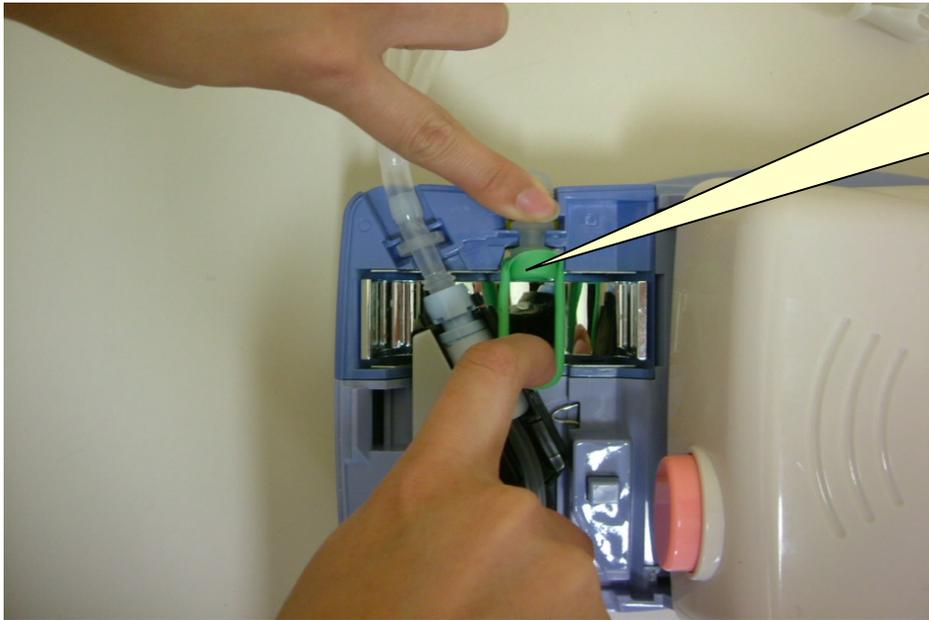

ふたを閉じると
照射が始まる

46. お腹のチューブをとりだす



ここを押すと
取り出せる

47. ふたを閉めて電源を切る



2秒以上
長押し

48. 緑色の保護カバーをつける



49. チューブをまるめてお腹へ戻す

50. すべて終了した事を確認する

51. 使用したバッグを片付ける

排液はトイレに
流して捨てる



お疲れ様でした