


# 「つなぐ」を使用した バック交換手順書

2014年12月01日作成

2020年01月27日改訂

# 1. 必要物品の準備

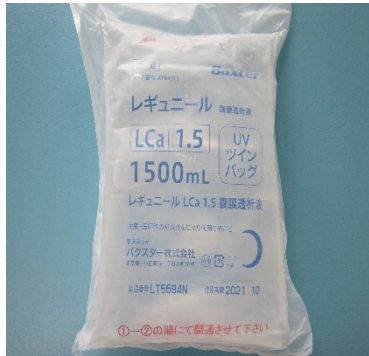

透析液



つなぐ



下敷き 保温カバー



ウェットティッシュ



キャップ



スタンド



はかり



記録ノート/ペン



アルコール  
消毒


## 2. 身の回りの確認

- 爪は長くないですか？
- 腕時計など手首にはめていないですか？
- 指輪など外せるものはないですか？
- 袖が手首などにかからないようにまくれますか？  
または、袖は短くできますか？

### 3. 空調・換気扇を止める



## 4. テーブルをふく

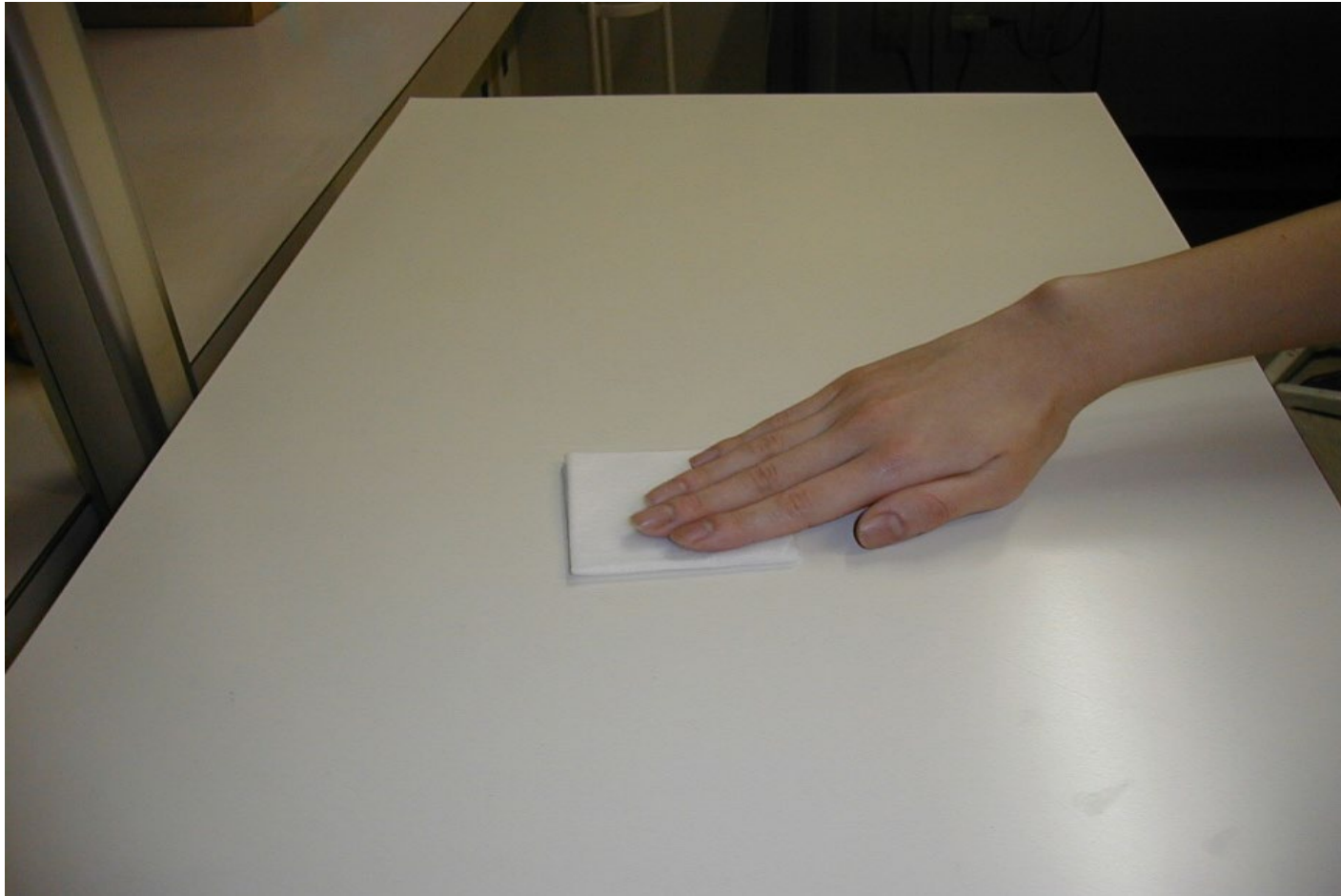

# 5. 手洗い手順表に沿って手を洗う



腕時計は外して手首まで出す



手を拭いた後のペーパーで  
水栓を閉める

## 6. キットからマスクを取り出し 鼻まで装着する



キャップセットの名前  
(ホームPDシステムつなぐ  
セットキャップキット)


開封前に破損ないか  
チェックしてください！

# 7. 透析液の内容を確認する

## 1) 濃度・内容量確認

破損ないかチェック！

## 2) 使用期限の確認

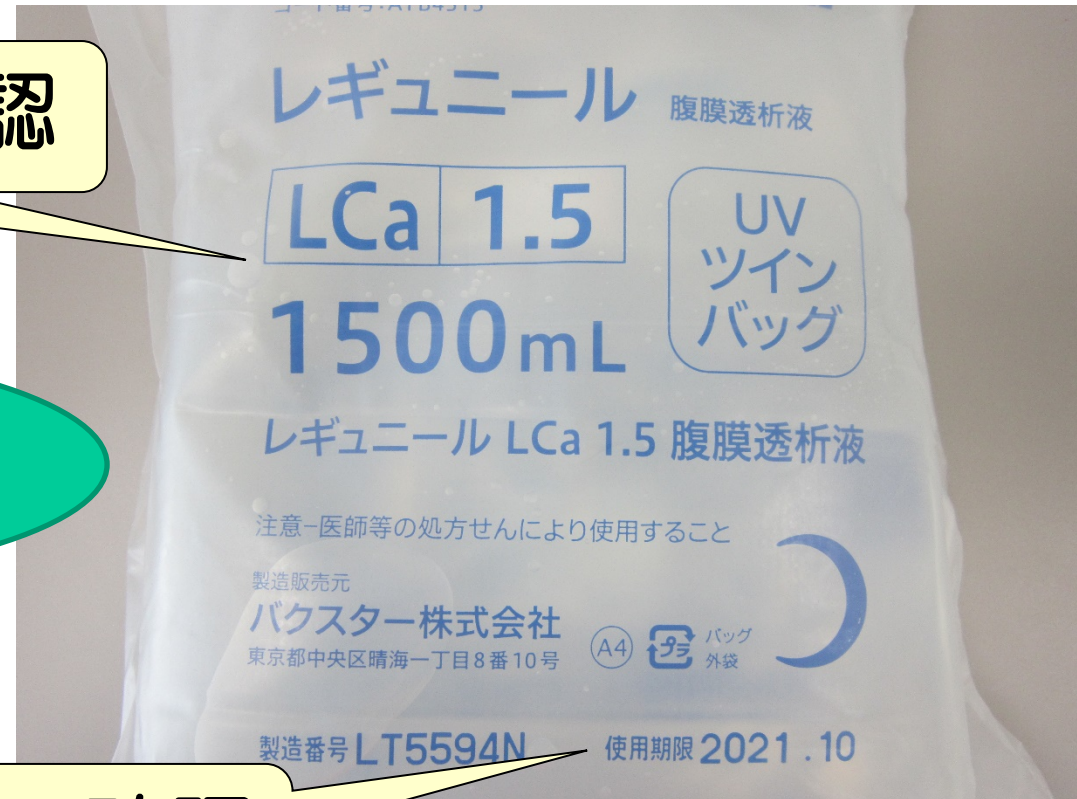



# 8. 袋を開封する


袋がくっついているので手を入れてはまず



# 9. 青と白のクランプを閉じる

この部分が  
一番きれい！  
床に落とさない  
ように注意！



青と白を両方とも  
15cmくらい  
下にずらす

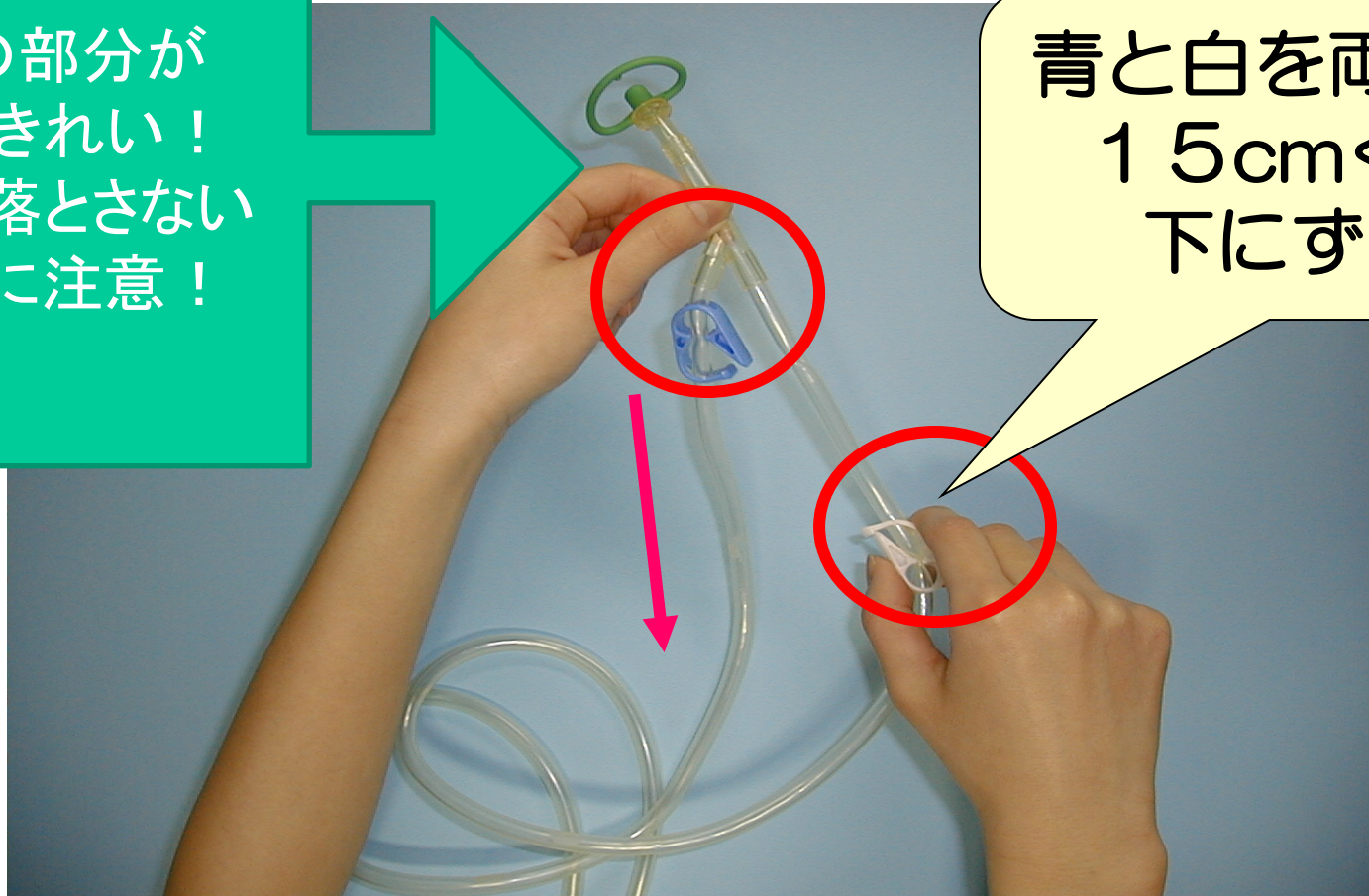


# 10. 排液バックをかごに置く



# 11. 巻きながら隔壁開通を 2回行う

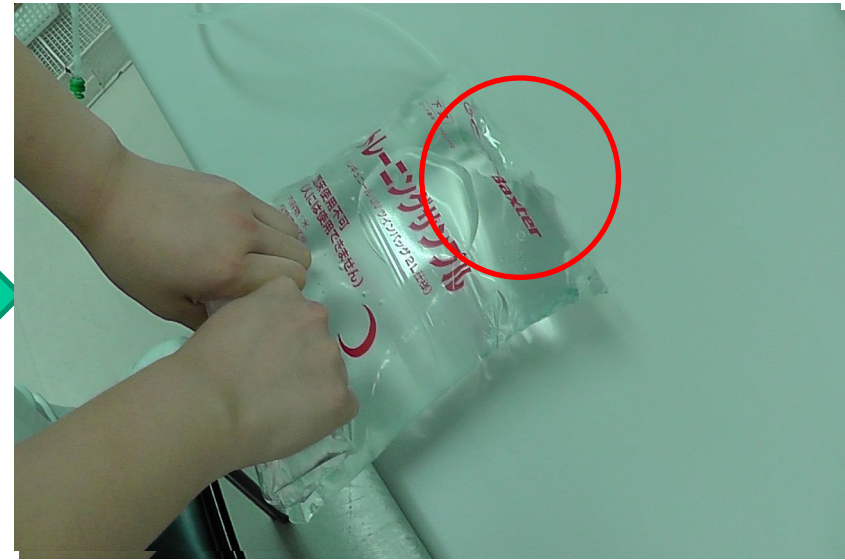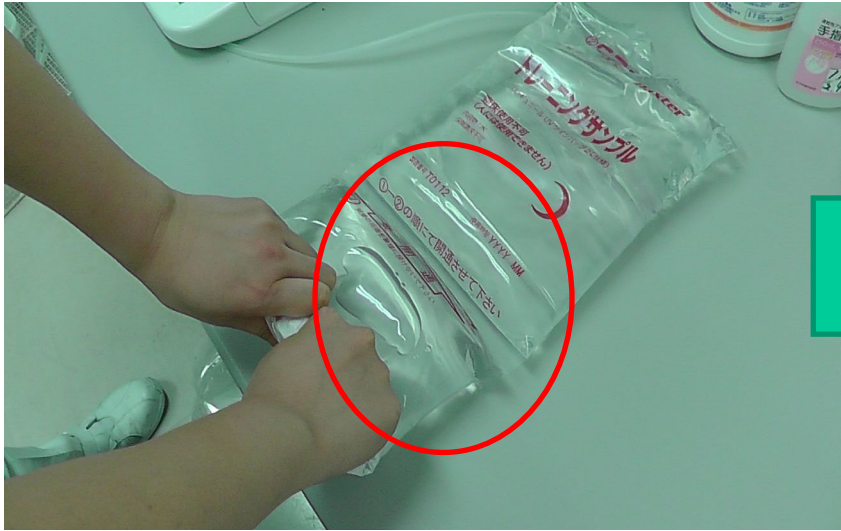

液がルートに出ていますか？

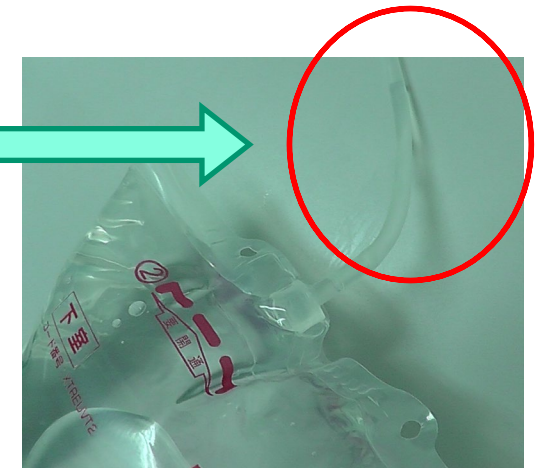

## 12. 赤いシールを剥がす




必ず隔壁開通した  
後に！！

# 13. 液を保温カバーに入れる



# 14. お腹からチューブを取り出し 緑色の保護カバーを外す


きれいな部分です！  
床に落とさないように！

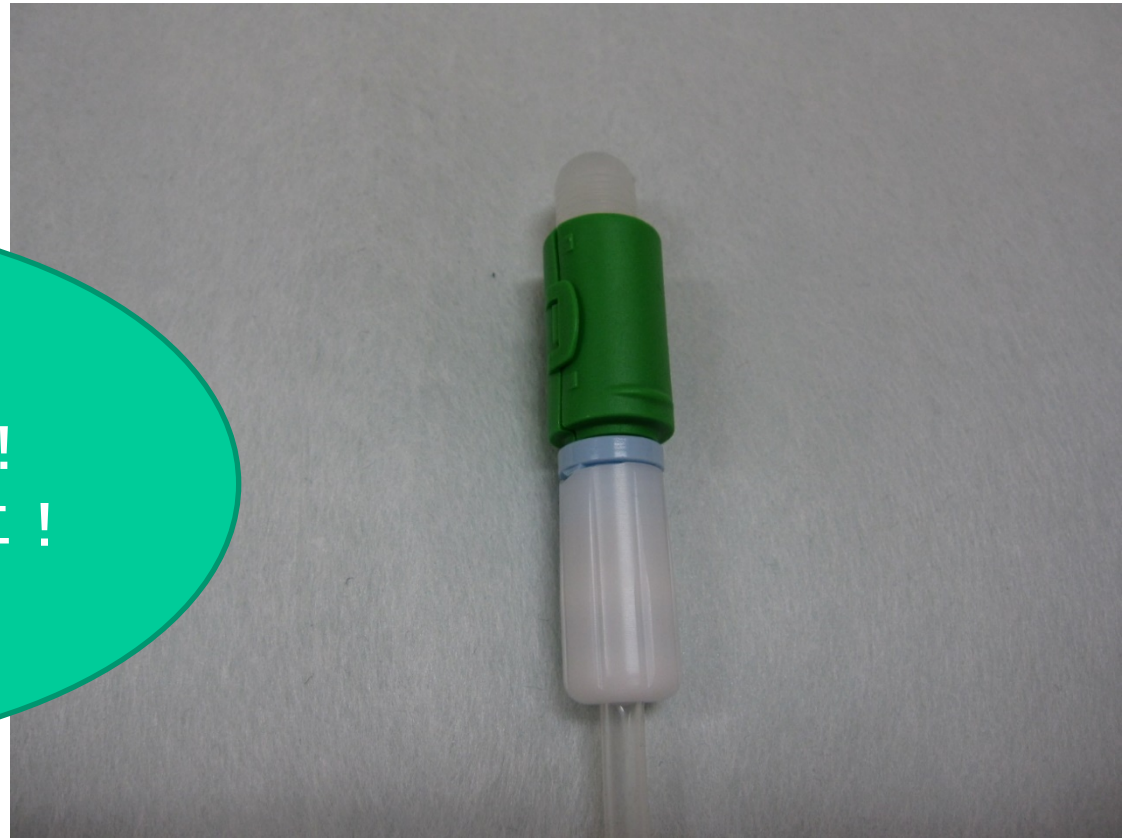

接続

# 15. つなぐの電源を入れる


1秒以上  
長押し

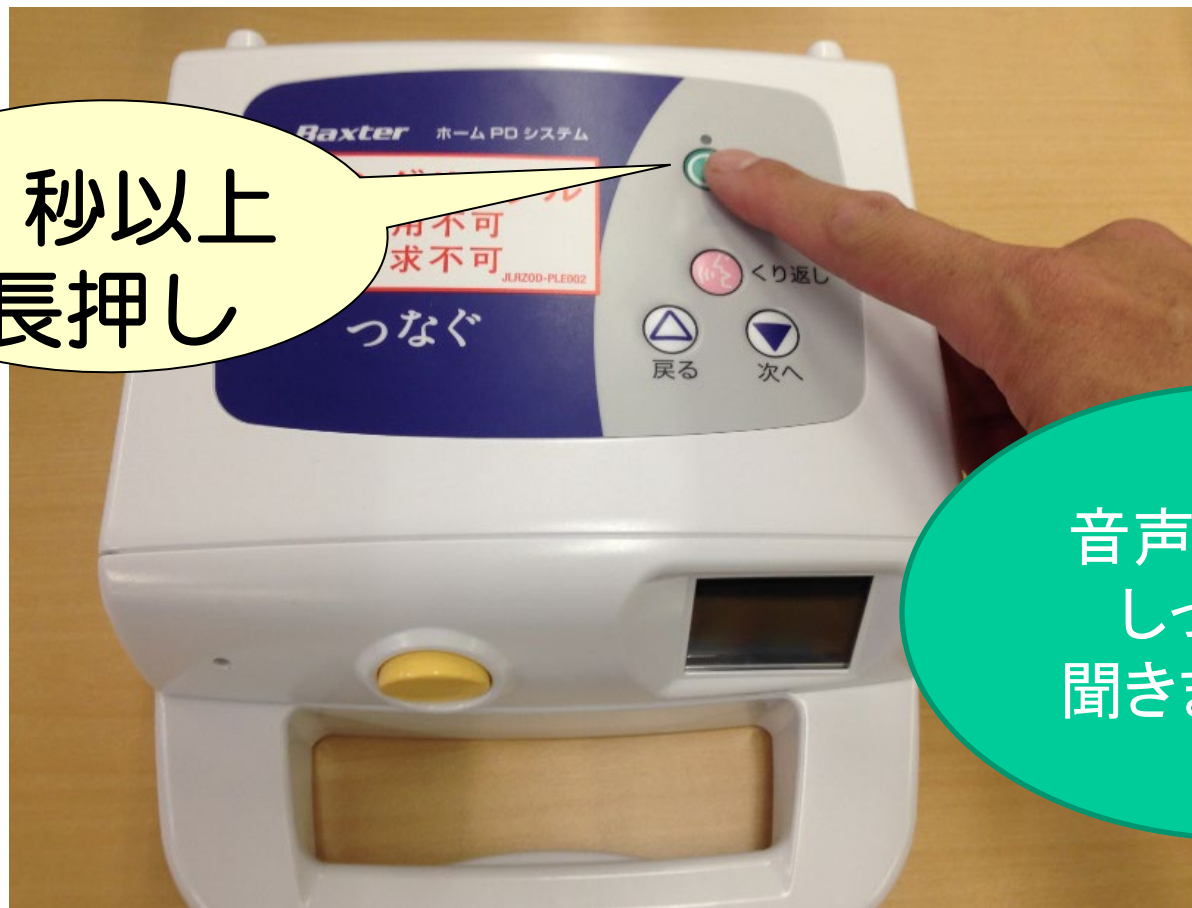

音声案内あり  
しっかりと  
聞きましょう！




# 16. 画面が接続操作になる

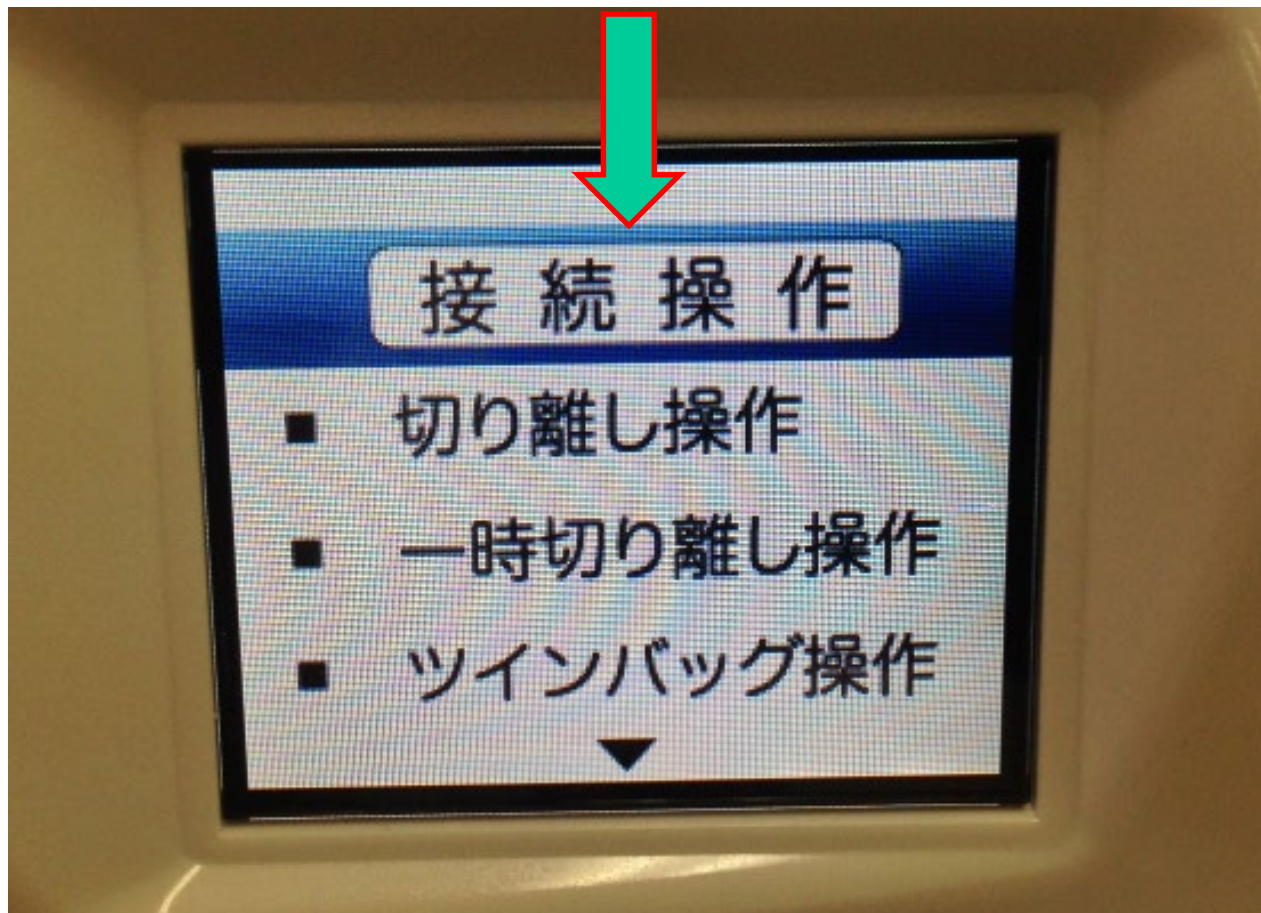


確認後次のページへ

17. 画面が

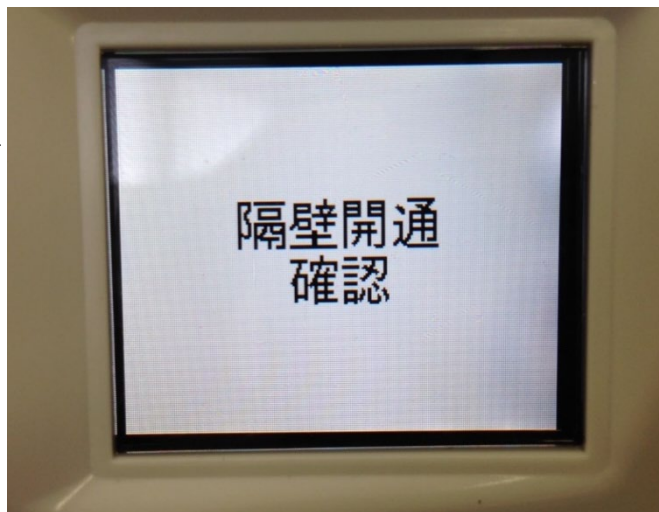

になったら

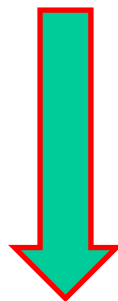

次へを1回おす  
おしたら次の  
ページへ

# 18. 手指のアルコール消毒をする



15秒ほど手に  
擦り込む

※何かに触れた後も消毒を行いましょう  
(髪の毛など・・・)


19.




がでたら**フタ**をあける



## 20. 手前にお腹のチューブ入れる

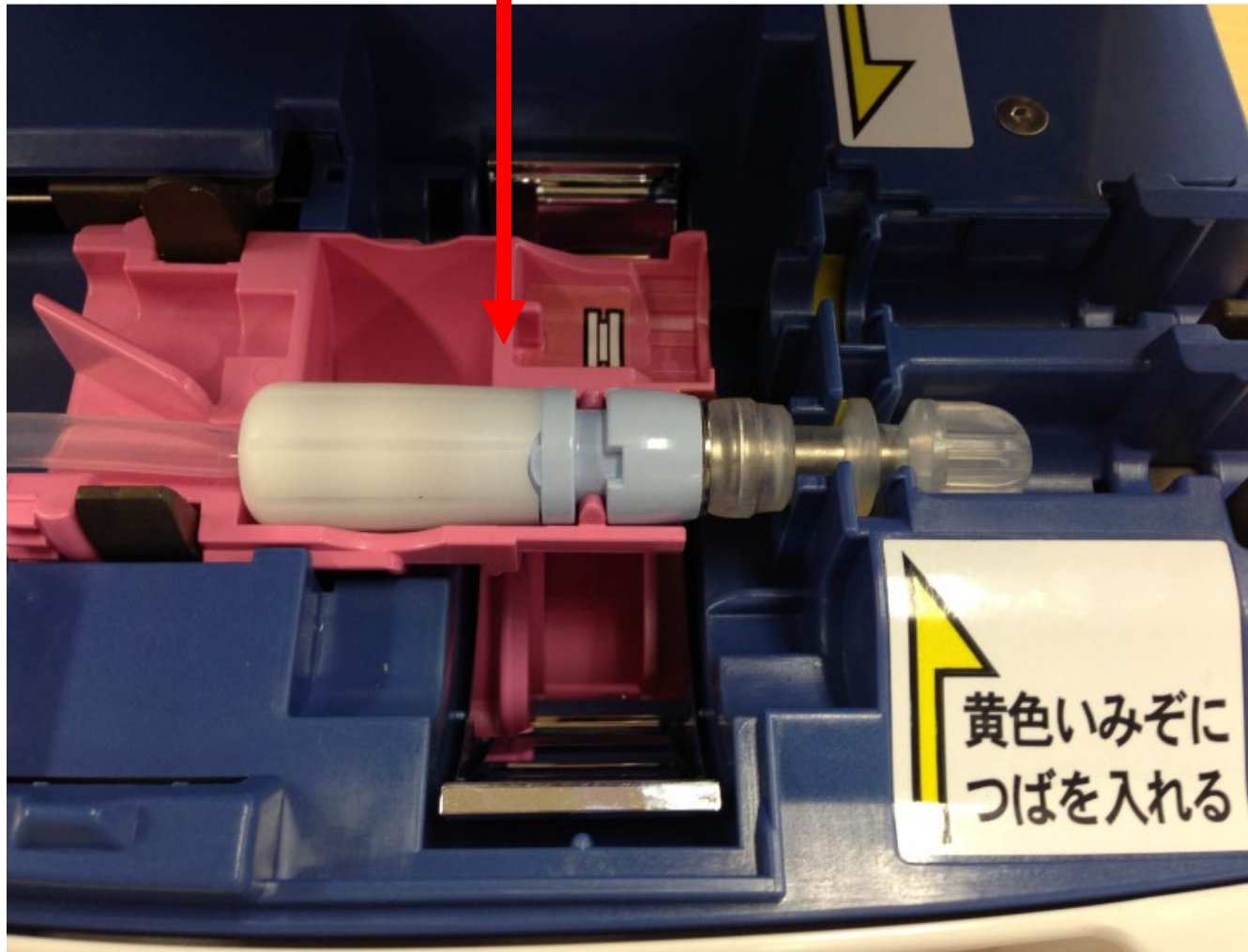


## 21. 奥に液のつば部分を入れる

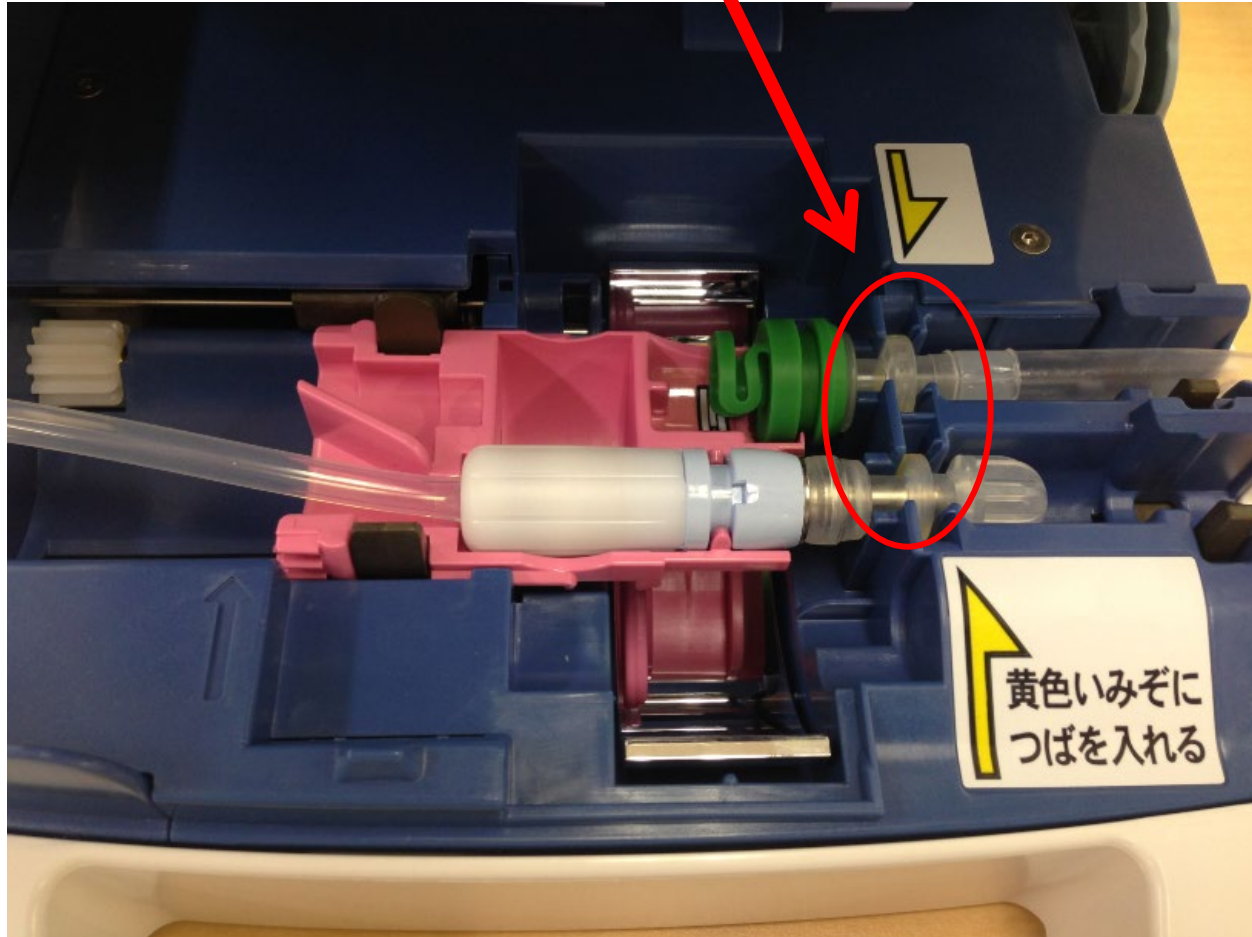

## 22. フタを閉じると照射が始まる




表示が変わる

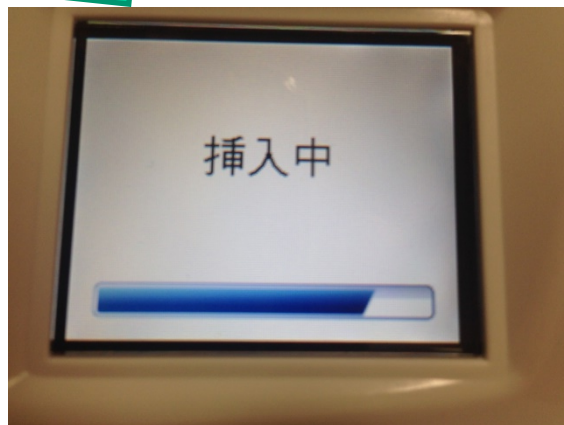

完了までいったら  
次のページへ

23.

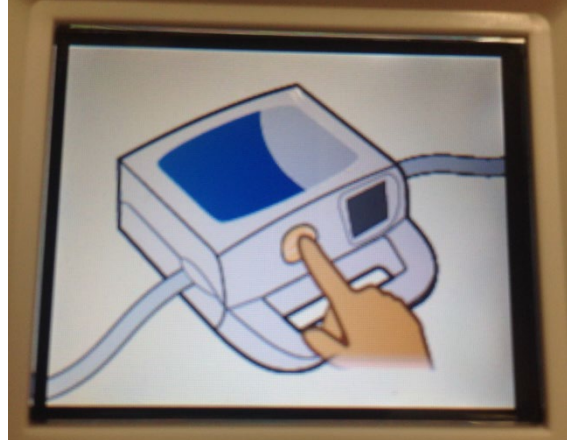

の表示を確認し


フタを開けて手前のキャップを捨てる



手前の  
キャップ  
を捨てる



## 24. お腹のチューブを上を持ち上げ外す

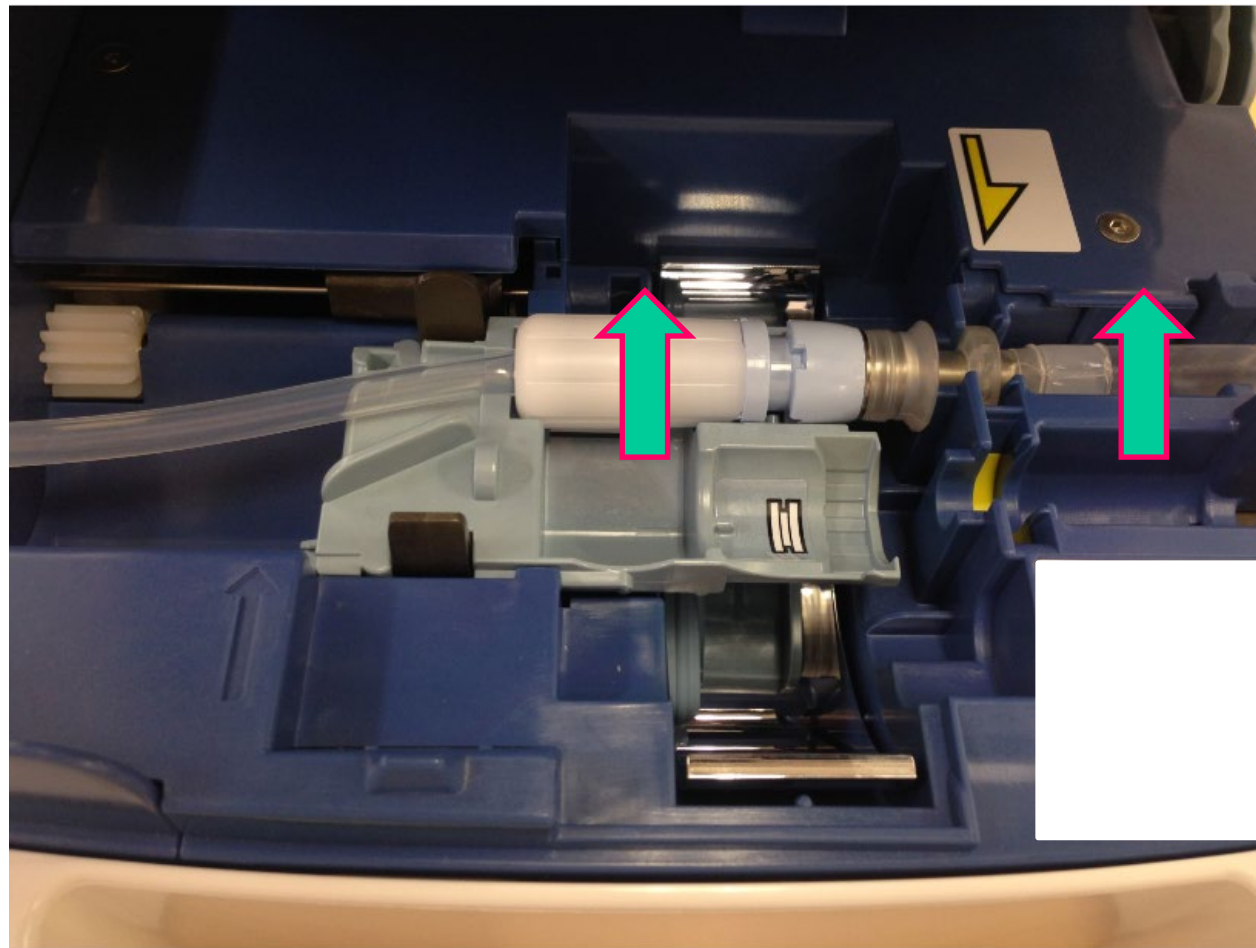

25. フタを閉じると電源が切れる

## 26. 緑色の保護カバーをつける




排液

## 27. 白いクランプを開ける



排液

## 28. お腹のチューブのクランプを回して開ける

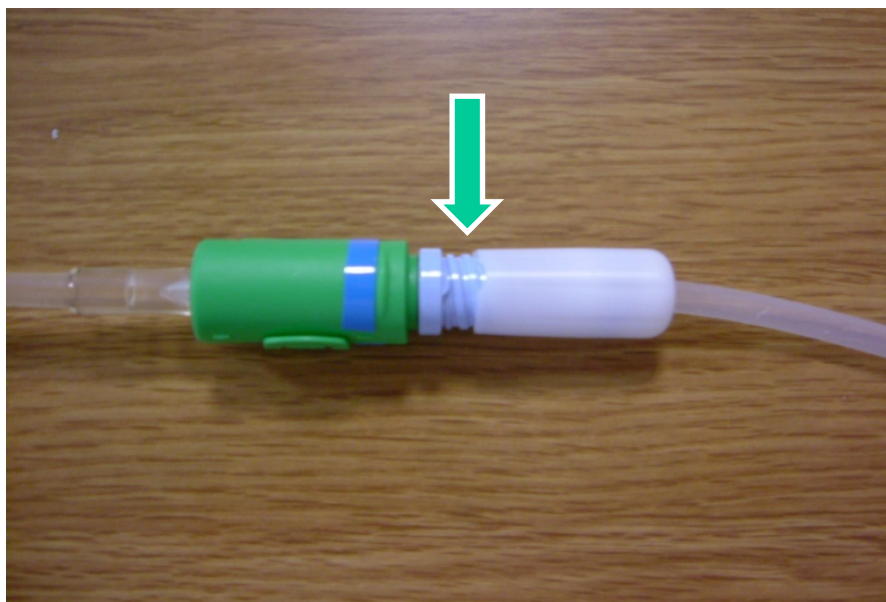


排液の開始時間を確認し  
ノートに記載する

排液

## 29. 現在排液中


おなかの液をだしている

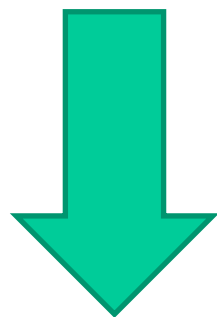

液がでなくなるまで待つ  
(最低10分程度)

液が出なくなったら

## 30. お腹のチューブのクランプを 回して閉める

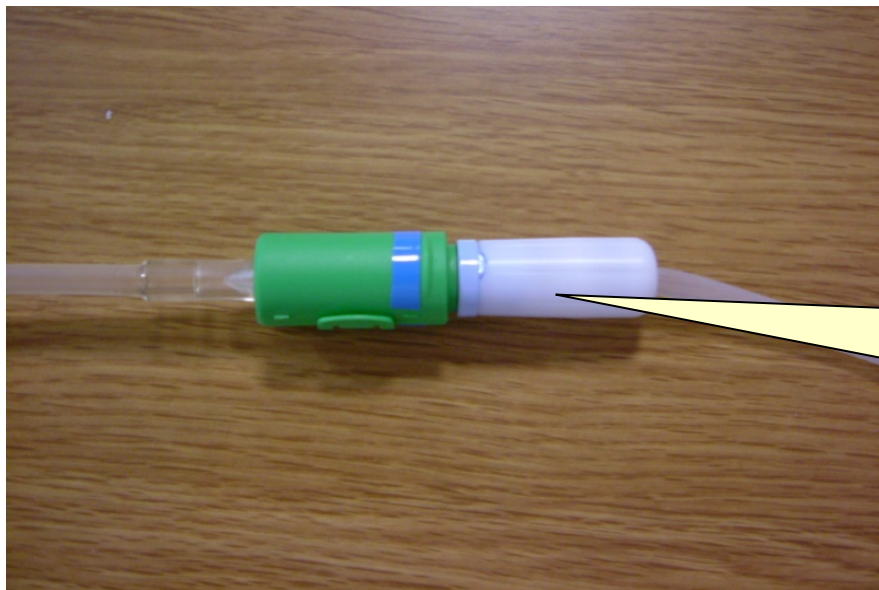

**カチッと**  
音がするまで  
閉める

## 31. 白のクランプを閉める



排液の終了時間確認  
排液時間（何分か）をノートに記載



## 32. 排泄液の色を確認し量を測定・記録



フィブリンないかな？  
赤くないかな？  
濁ってないかな？




白く濁っていたらすぐに  
病院に電話をしましょう


### 33. 排液バックをかごに戻す



# 34. 液の量を量る

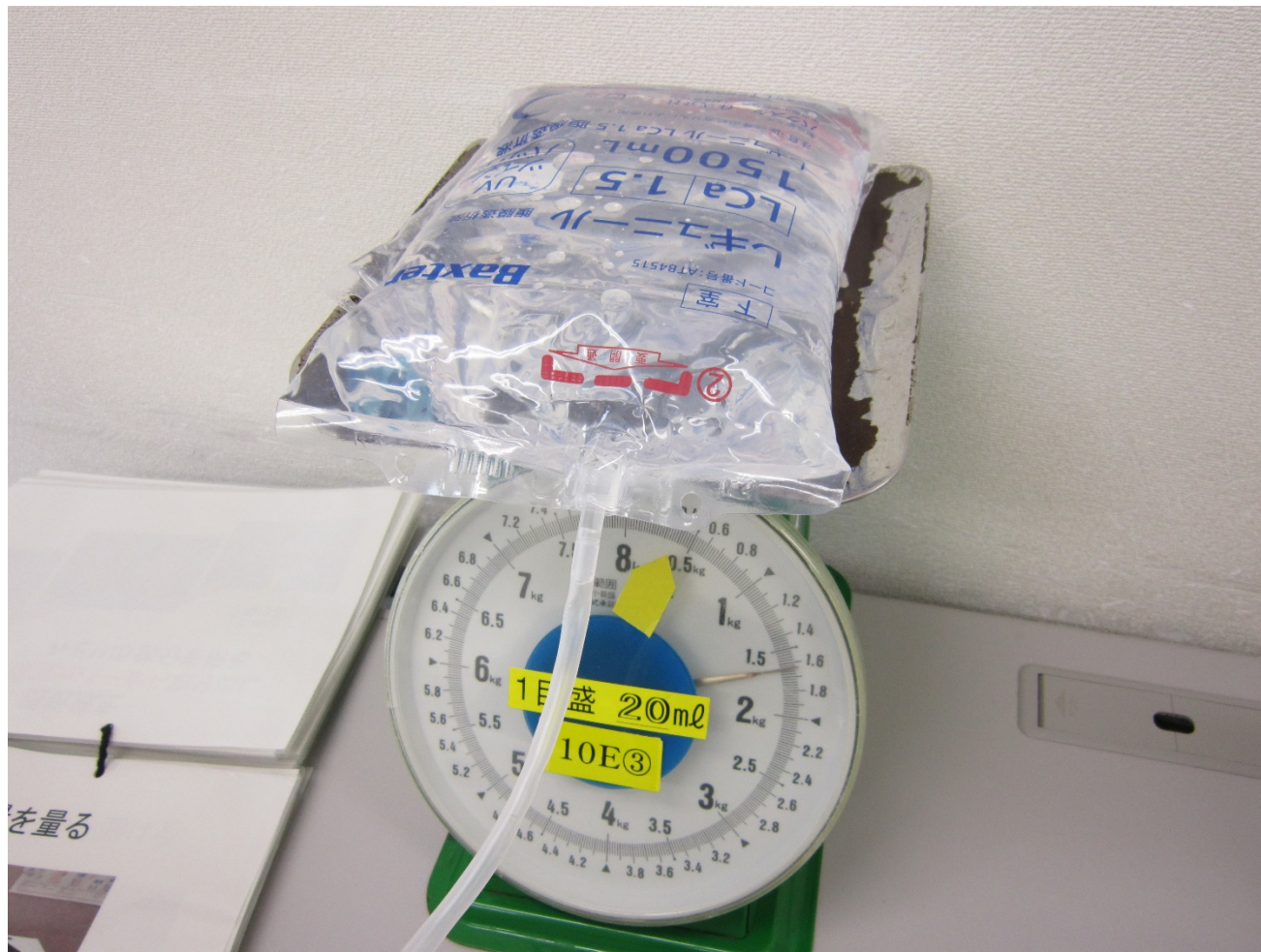

## 35. 白と青のクランプを開ける

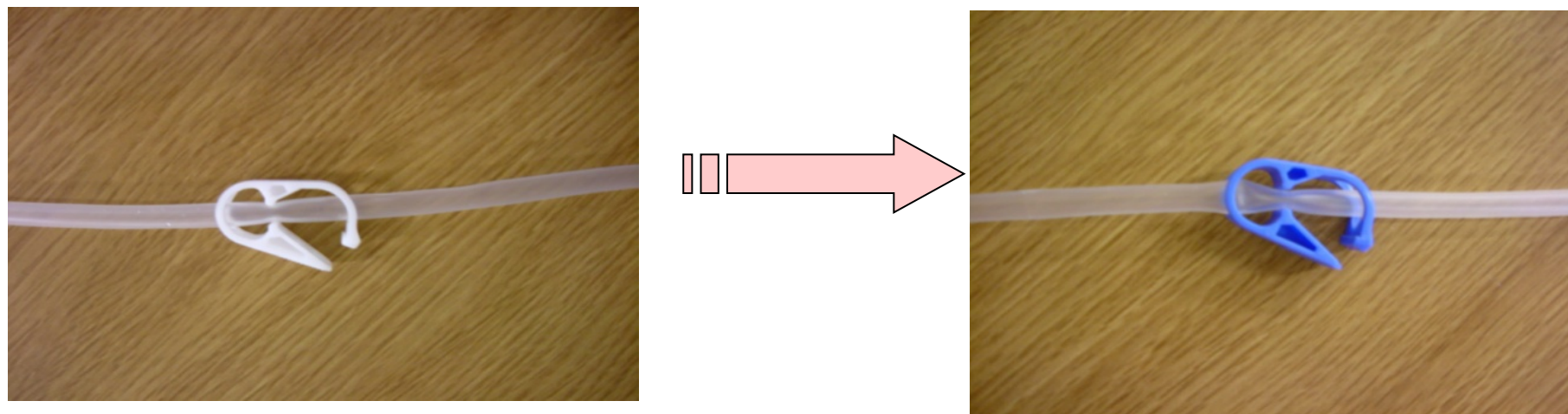

クランプを開いたら  
すぐ次ページへ


# 36. チューブを指でポンポンとはじき チューブの空気を流し、 決められた量まで液を流す



この部分に空気が  
たまっている

決められた量になったら

## 37. 青と白のクランプを閉じる

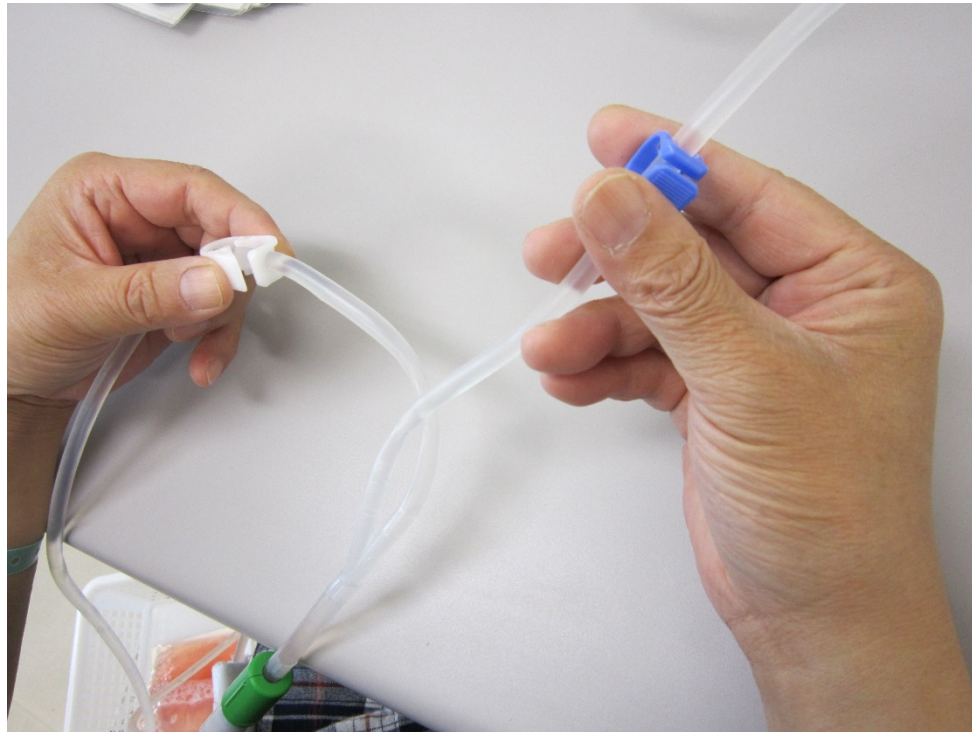


# 38. 液をスタンドの上部に掛ける



注液


## 39. 青のクランプ開ける

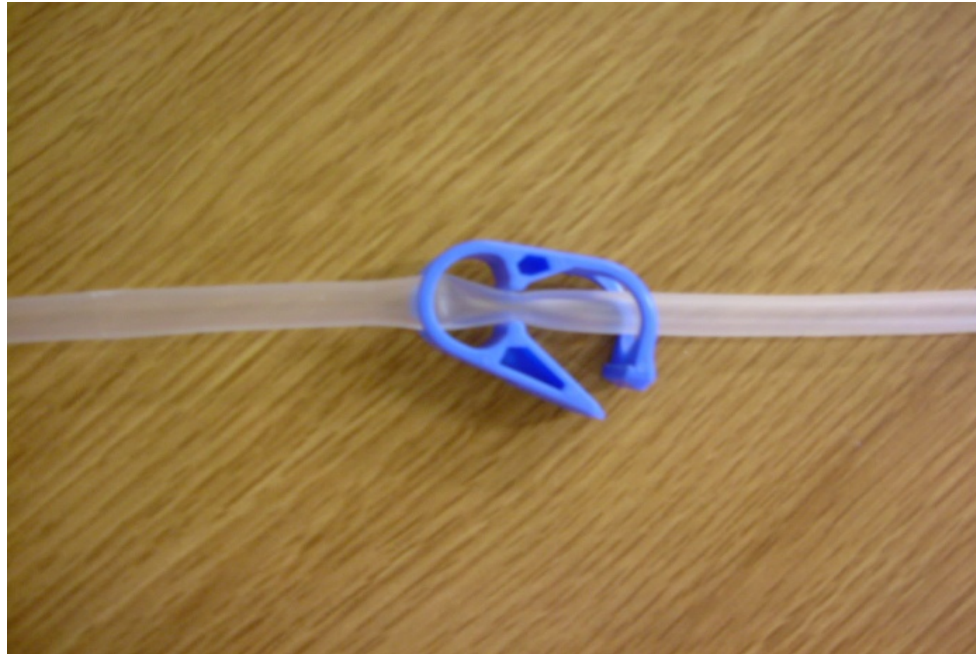



注液

## 40. お腹のチューブのクランプを 回して開ける

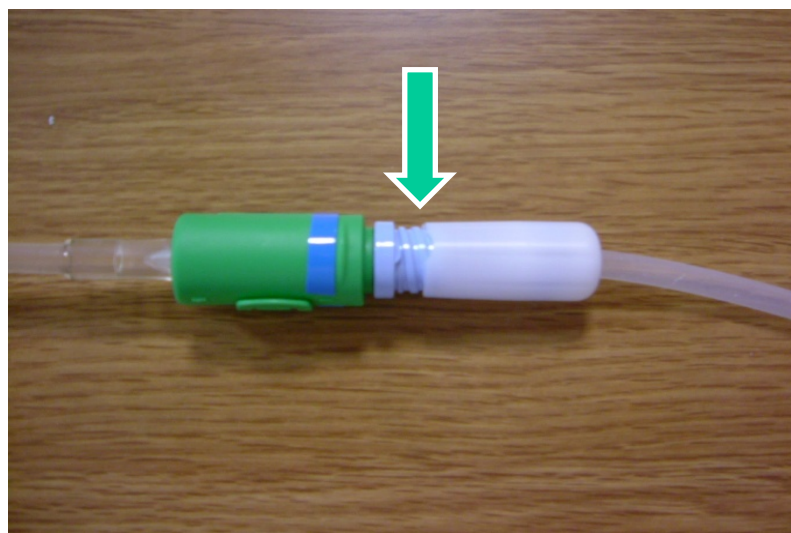


お腹に液が入り始めます！

注液

## 41. 現在注液中


おなかに液を入れている

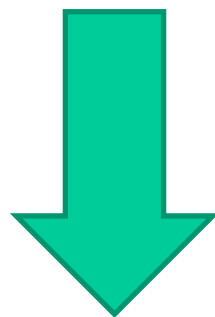


液が入るまで待つ  
入ったら次のページへ

液が全部入ったら

## 42. お腹のチューブのクランプを 回して閉じる

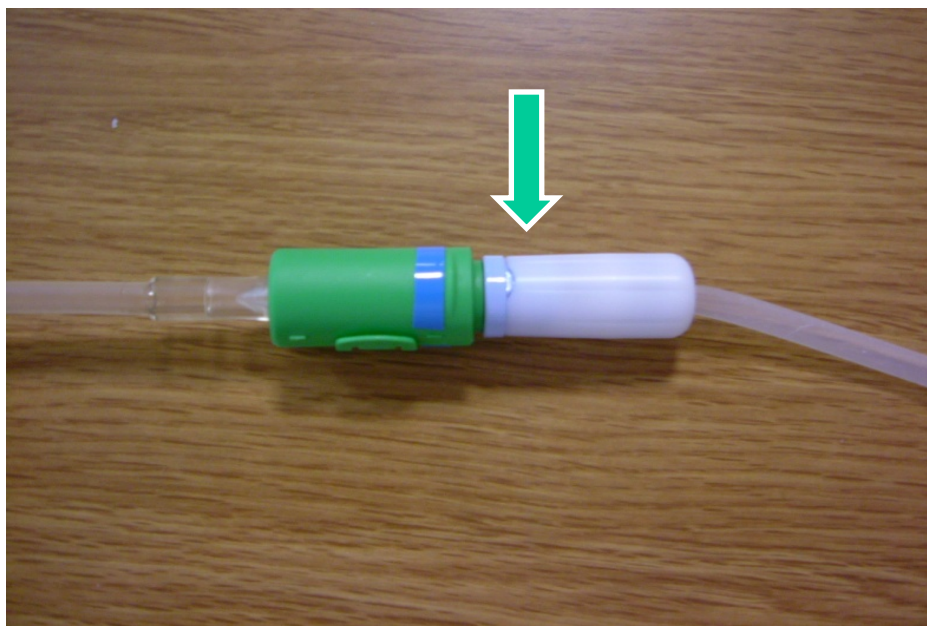

## 43. 青のクランプを閉じる

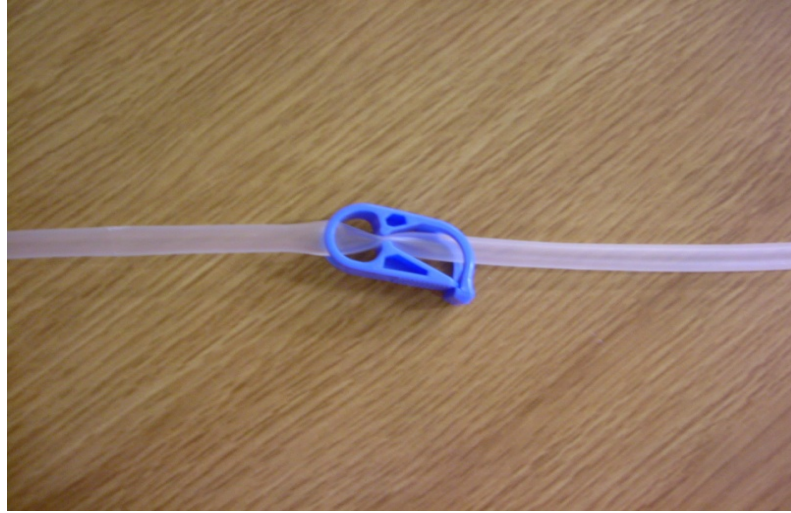

注液終了の時間を確認して  
ノートに時間を記載する

44.

空になった袋を  
スタンドから外し  
机の上におく

袋をおいたら

次ページへ



## 45. 緑色の保護カバーを外す



切り離し

## 46. つなぐの電源を入れる




入れたら次のページへ

47.

この画面を確認して


すぐ、次へを1回おす

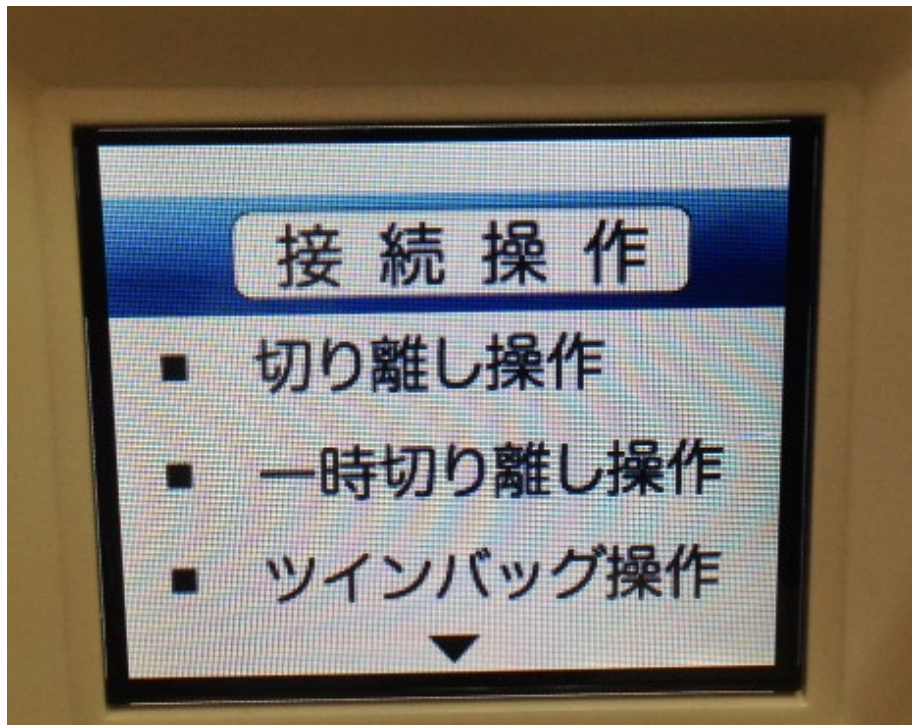

おしたら次のページへ



## 48. 切り離し操作の画面を確認

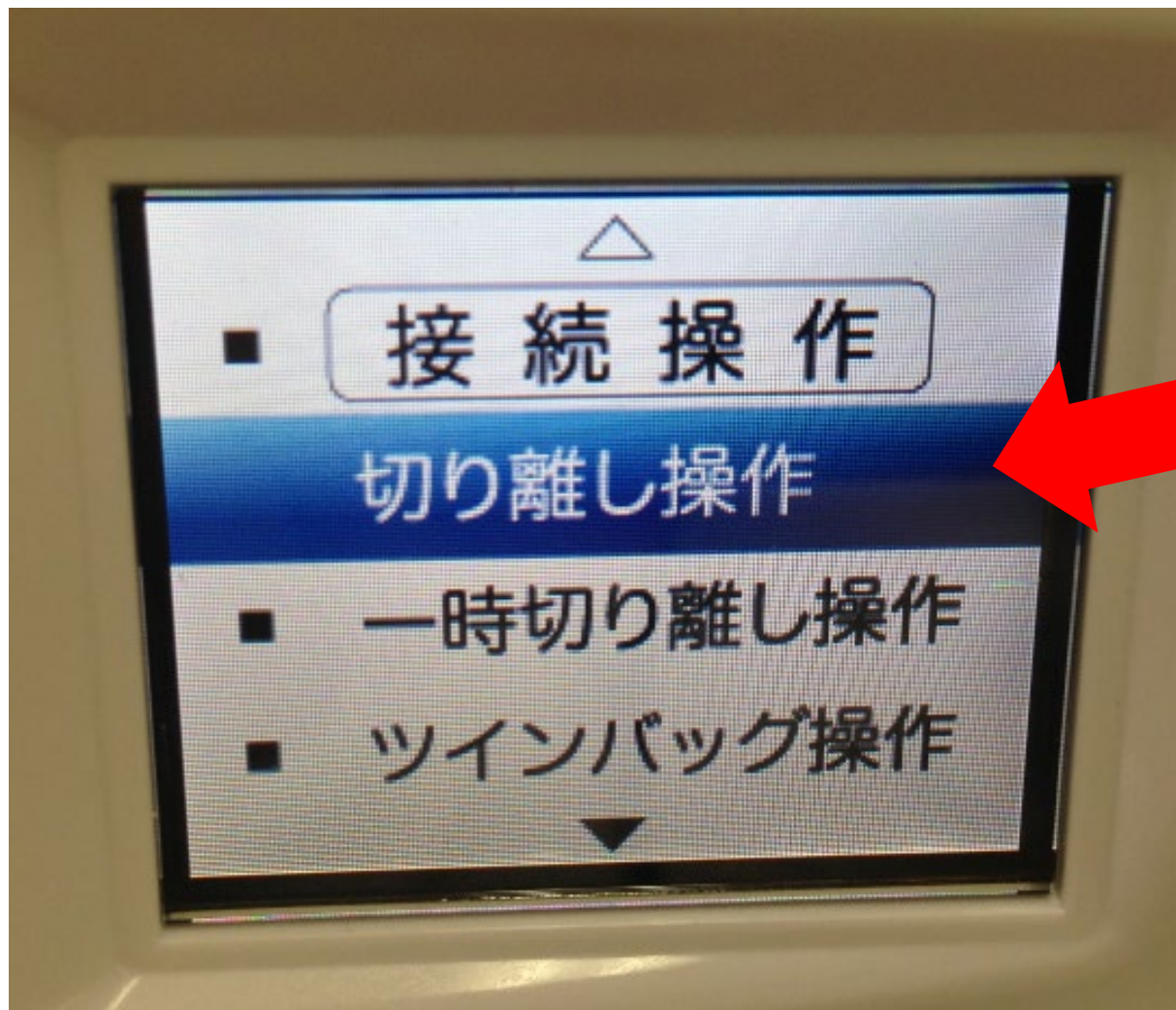

確認したら次のページへ

# 49. 手指のアルコール消毒をする



15秒ほど手に  
擦り込む

※何かに触れた後も消毒を行いましょう

50.




がでたらフタをあける




開けたら  
次のページへ

# 51. 手前にお腹のチューブを入れる

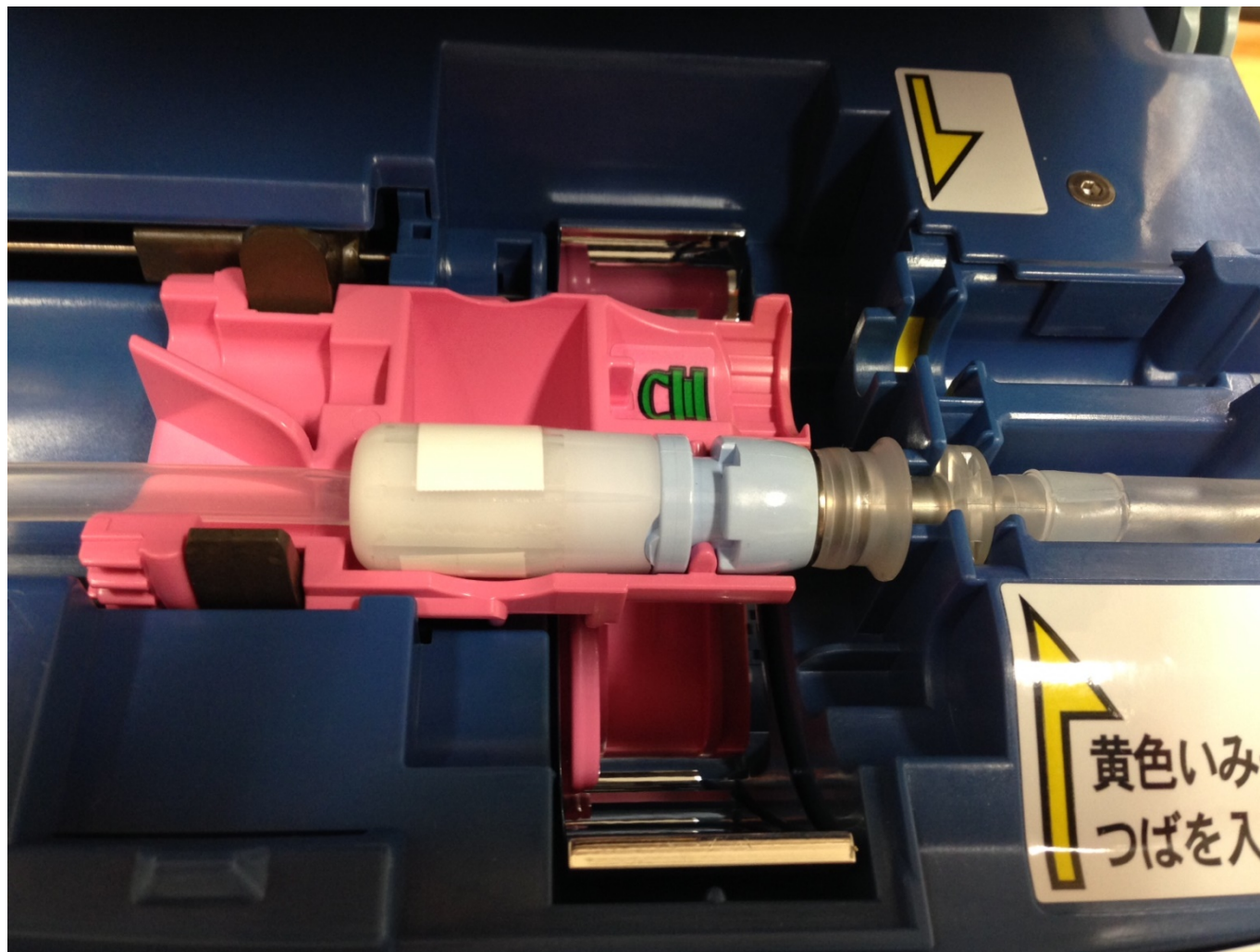


## 52. 奥に新しいキャップを入れる

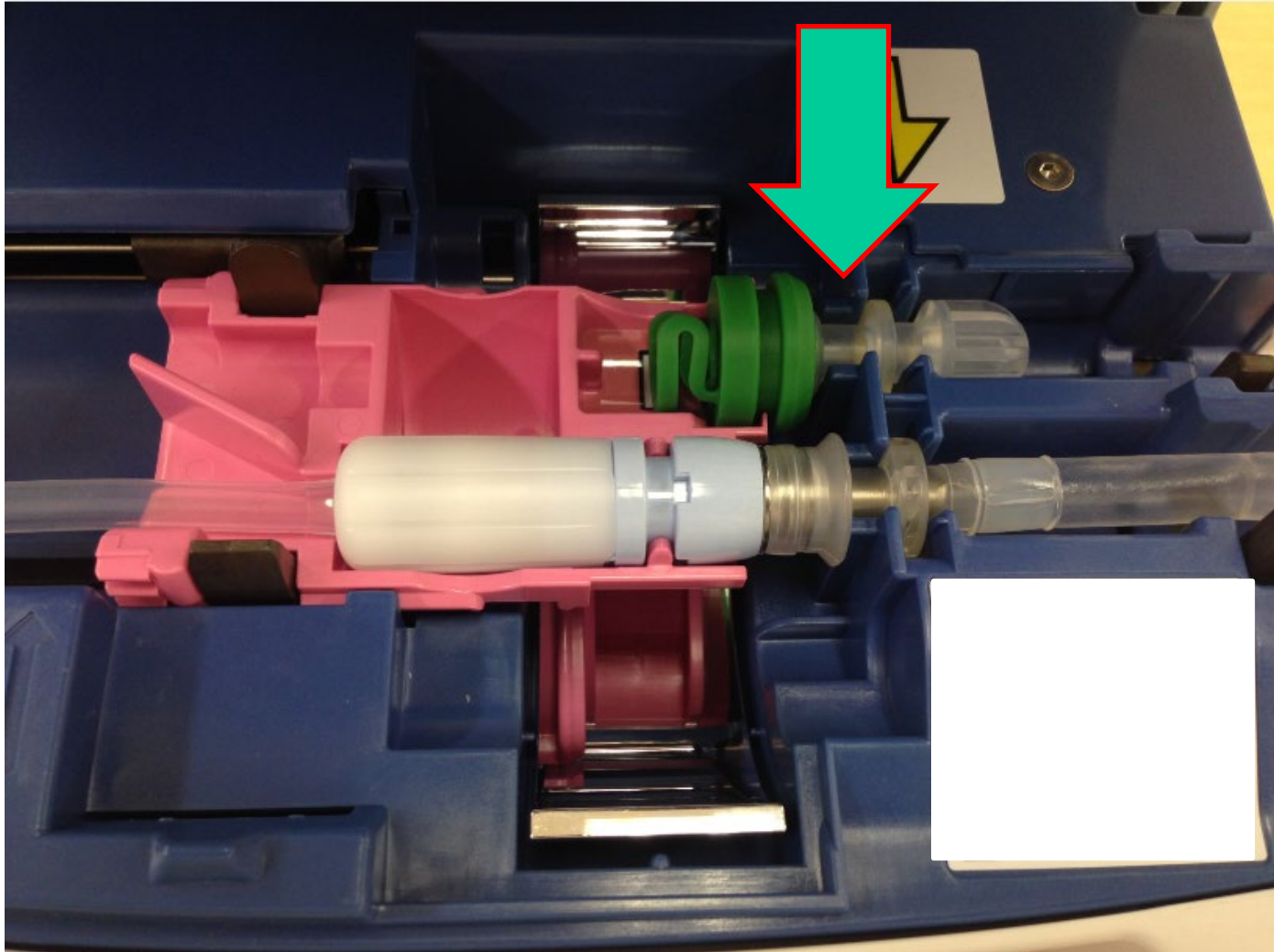


# 53. フタを閉じて接続が終わるのを待つ

画面はこう変わる

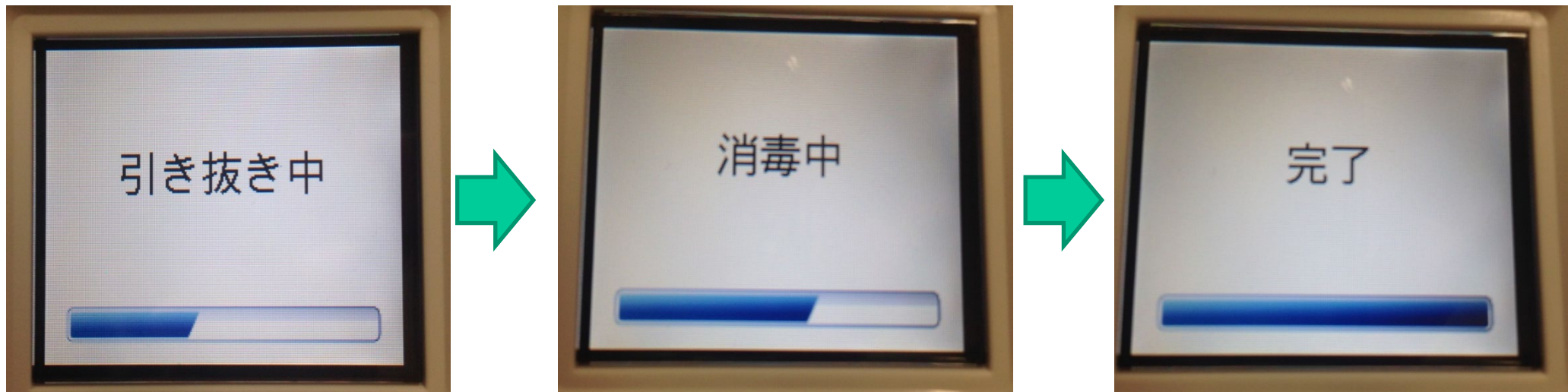

完了までいったら  
次のページへ

54.

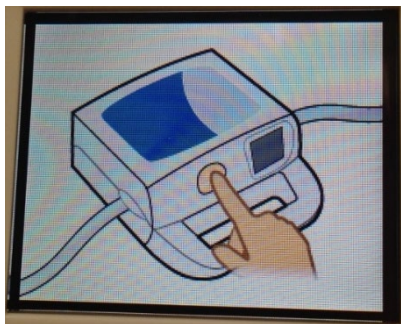


がでたらふたを**開けて**

手前の**チューブ**を取り外す



手前の  
チューブを  
取り外す

# 55. お腹のチューブを上を持ち上げて外す

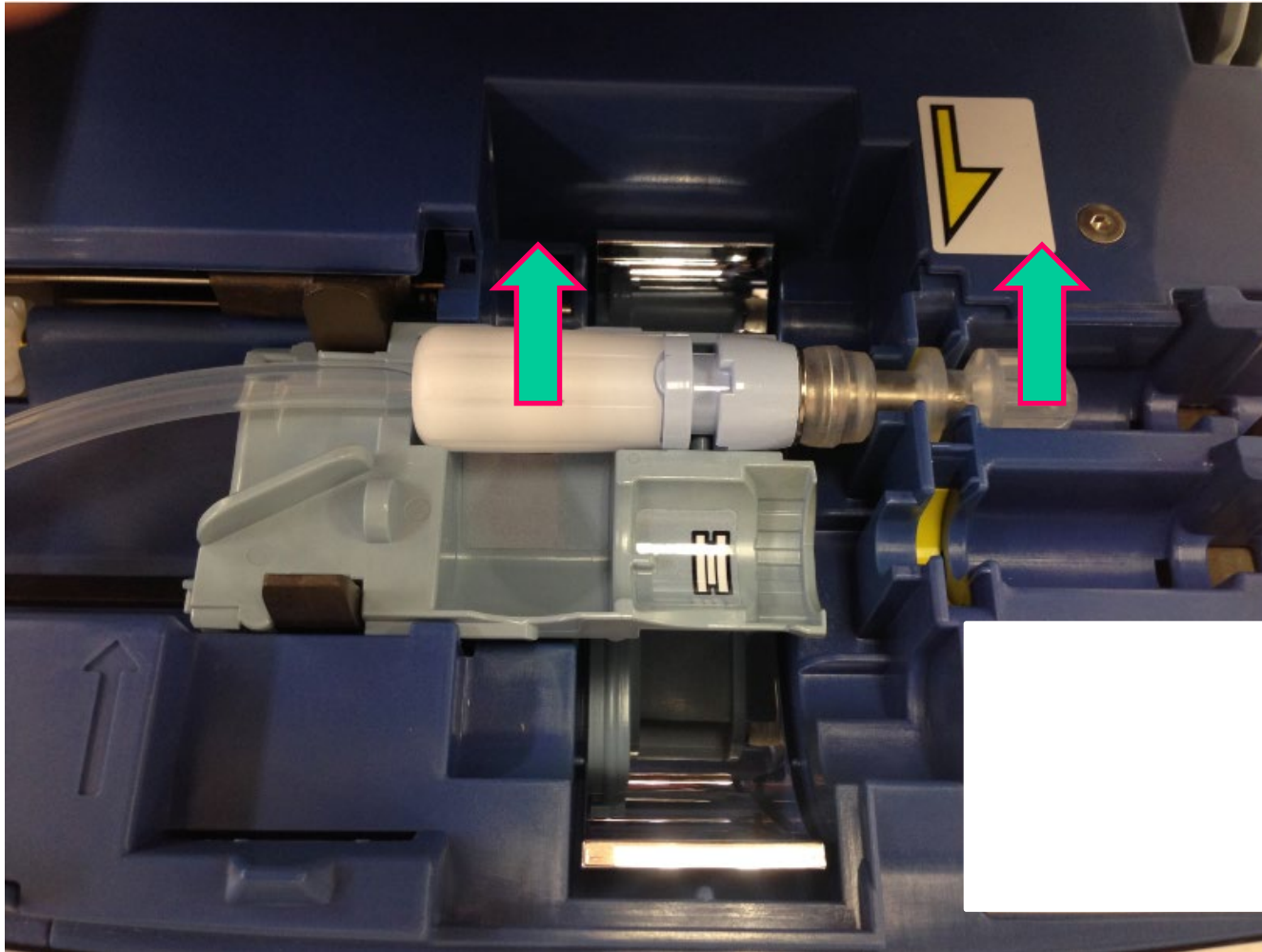



56. フタを閉じると電源が切れる

# 57. 緑色の保護カバーをつける



58. チューブをまるめてお腹へ戻す

59. すべて終了した事を確認する

## 60. 使用したバッグを片付ける

排液はトイレに  
流して捨てる



お疲れ様でした