


「つなぐ」を使用した バック交換手順書

名古屋大学大学院医学系研究科
腎不全システム治療学

平成26年12月1日作成
平成28年10月1日改訂

①必要物品の準備

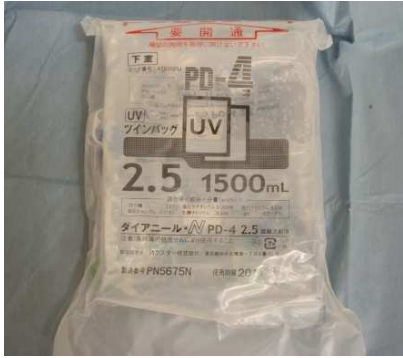

ダイアニール



つなぐ



下敷き 保温カバー



ウェットティッシュ



キャップ



スタンド



はかり



記録ノート/ペン




アルコール
消毒

②空調を止める



③テーブルをふく

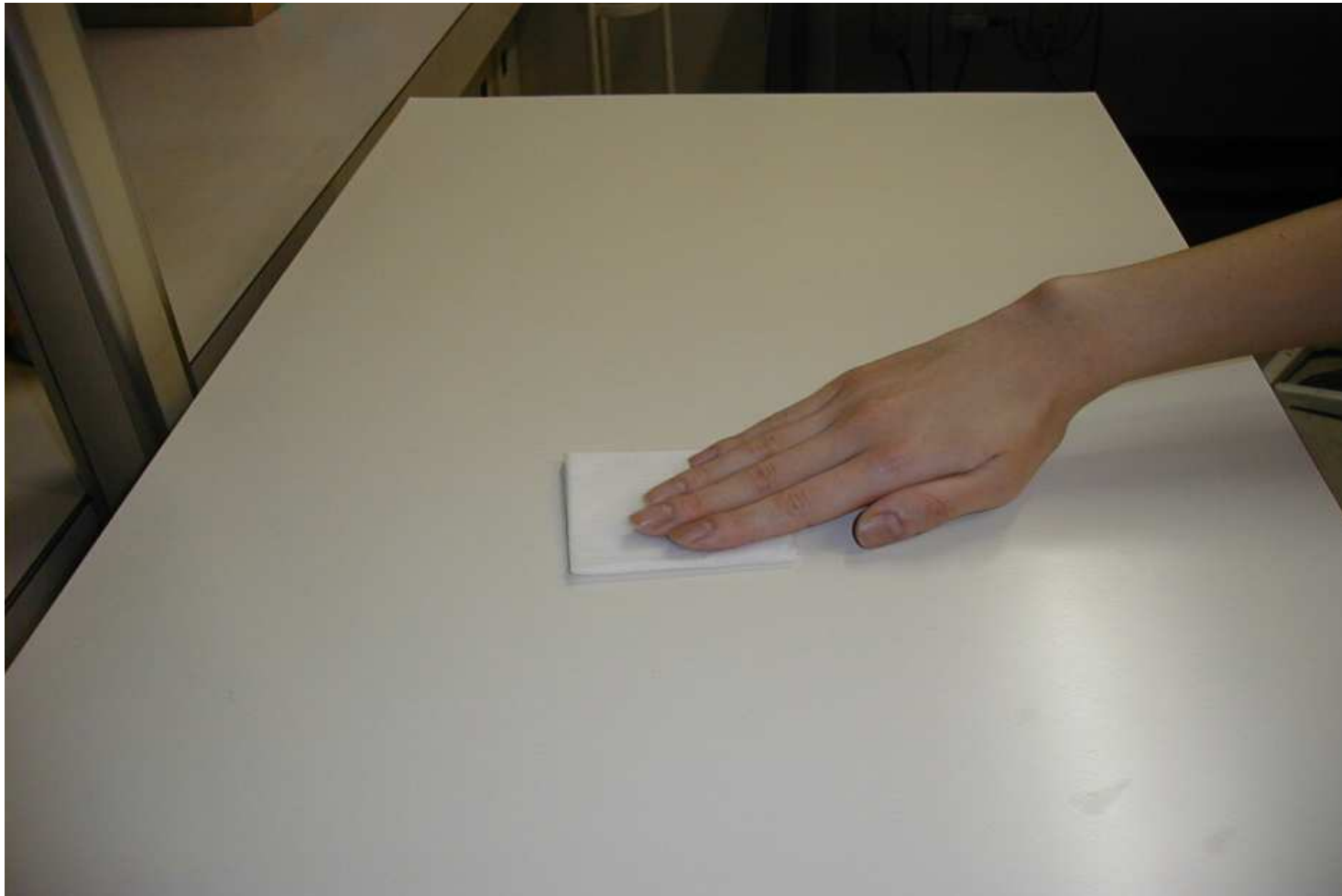

④PDノート、使用するペン、透析液の準備を行う



⑤手洗い手順表に沿って手を洗う



腕時計は外して手首まで出す



手を拭いた後のペーパーで
水栓を閉める

⑦透析液の内容を確認する

1) 濃度・内容量確認




2) 使用期限の確認

⑧袋を開封する

袋がくっついているので手を入れてはまず



⑨青と白のクランプを閉じる

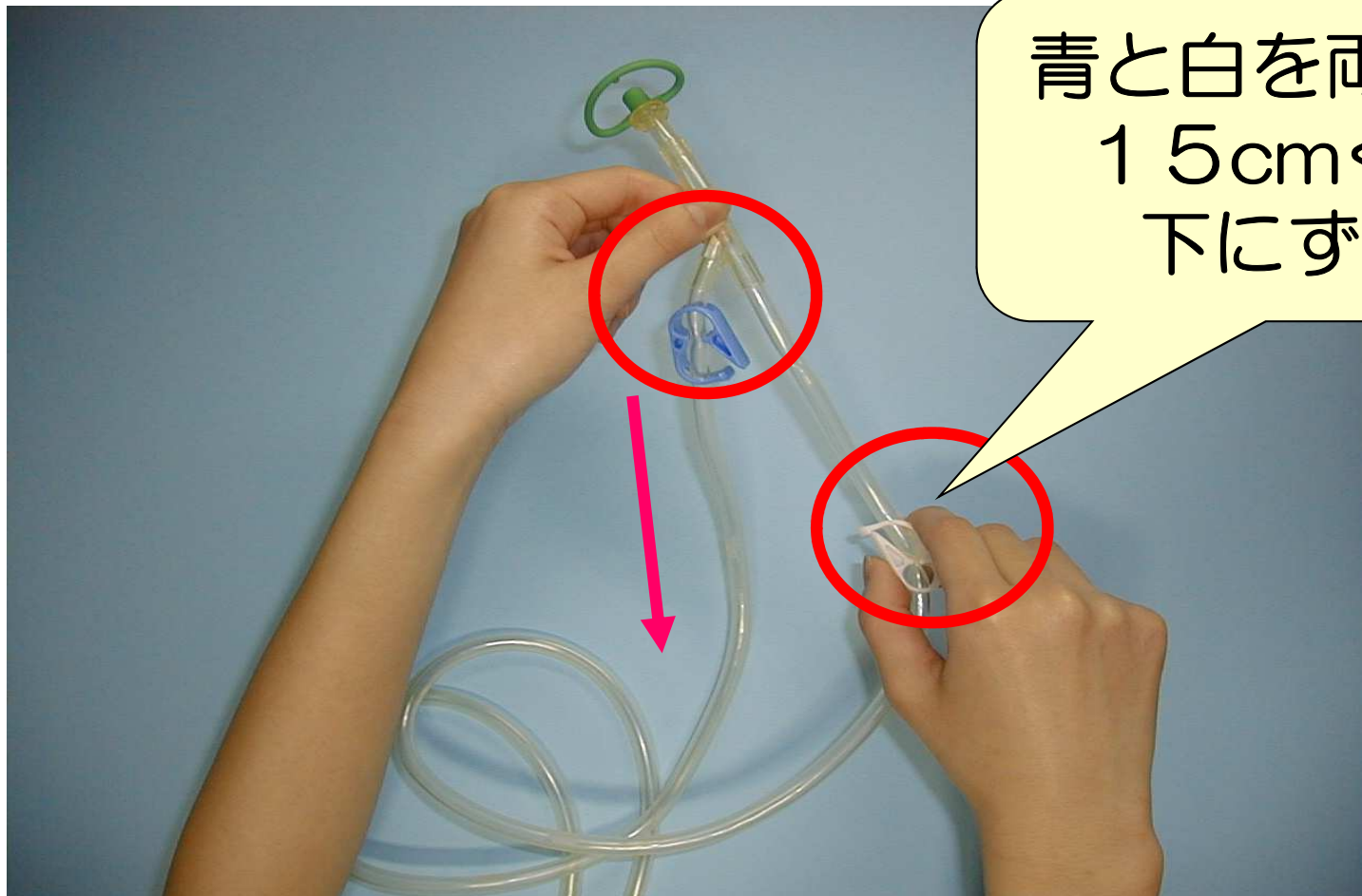

⑩ 排液バックをかごに置く



⑪ 液を押して上下を混ぜ 赤いシールをはがす



締めるようにして開通

⑫液を保温カバーに入れる



⑬ お腹からチューブを取り出し
緑色の保護カバーを外す




接続

⑭ つなぐの電源を入れる

1秒以上
長押し




⑮画面が接続操作になる

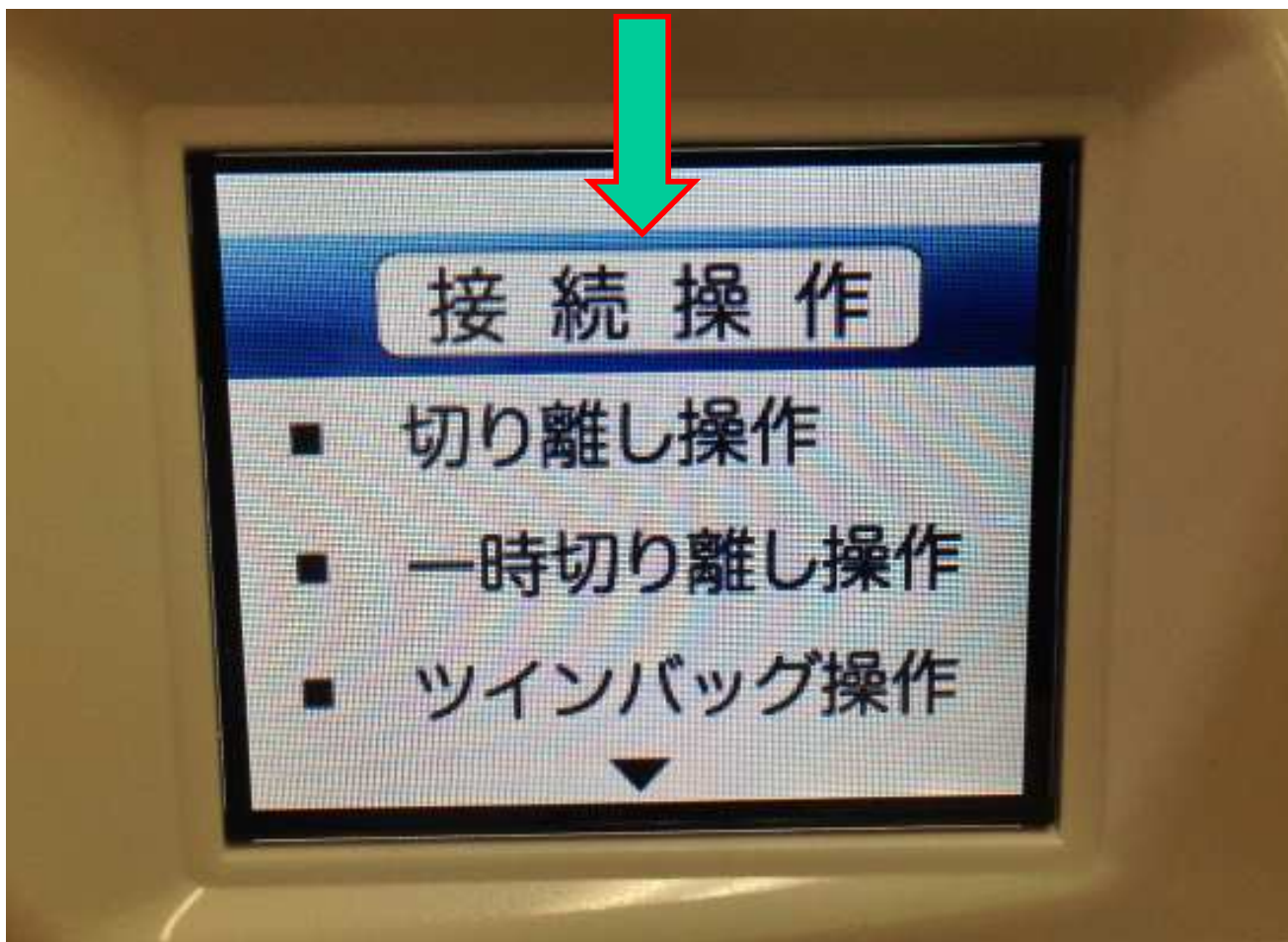


確認後次のページへ

①⑥画面が

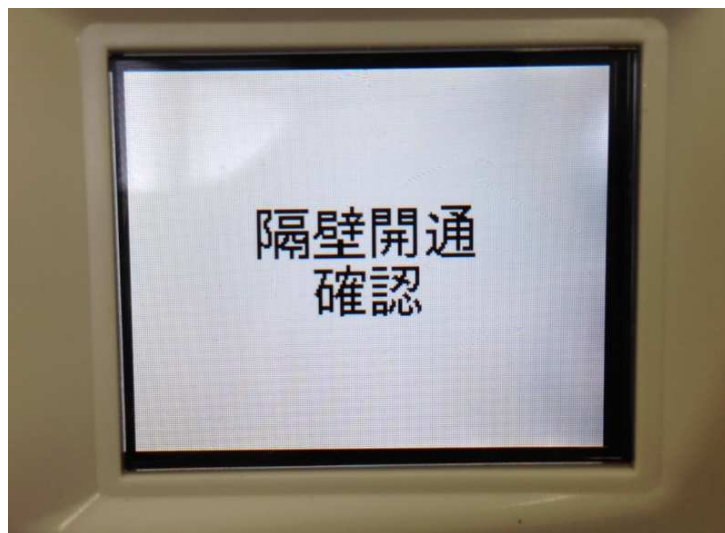

になったら

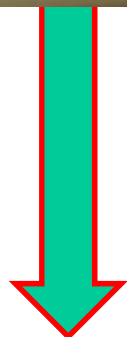

次へを1回おす
おしたら次の
ページへ

⑰手指のアルコール消毒をする



15秒ほど手に
擦り込む

※何かに触れた後も消毒を行いましょう


18




がでたら**フタ**をあける



①9 手前にお腹のチューブを入れる

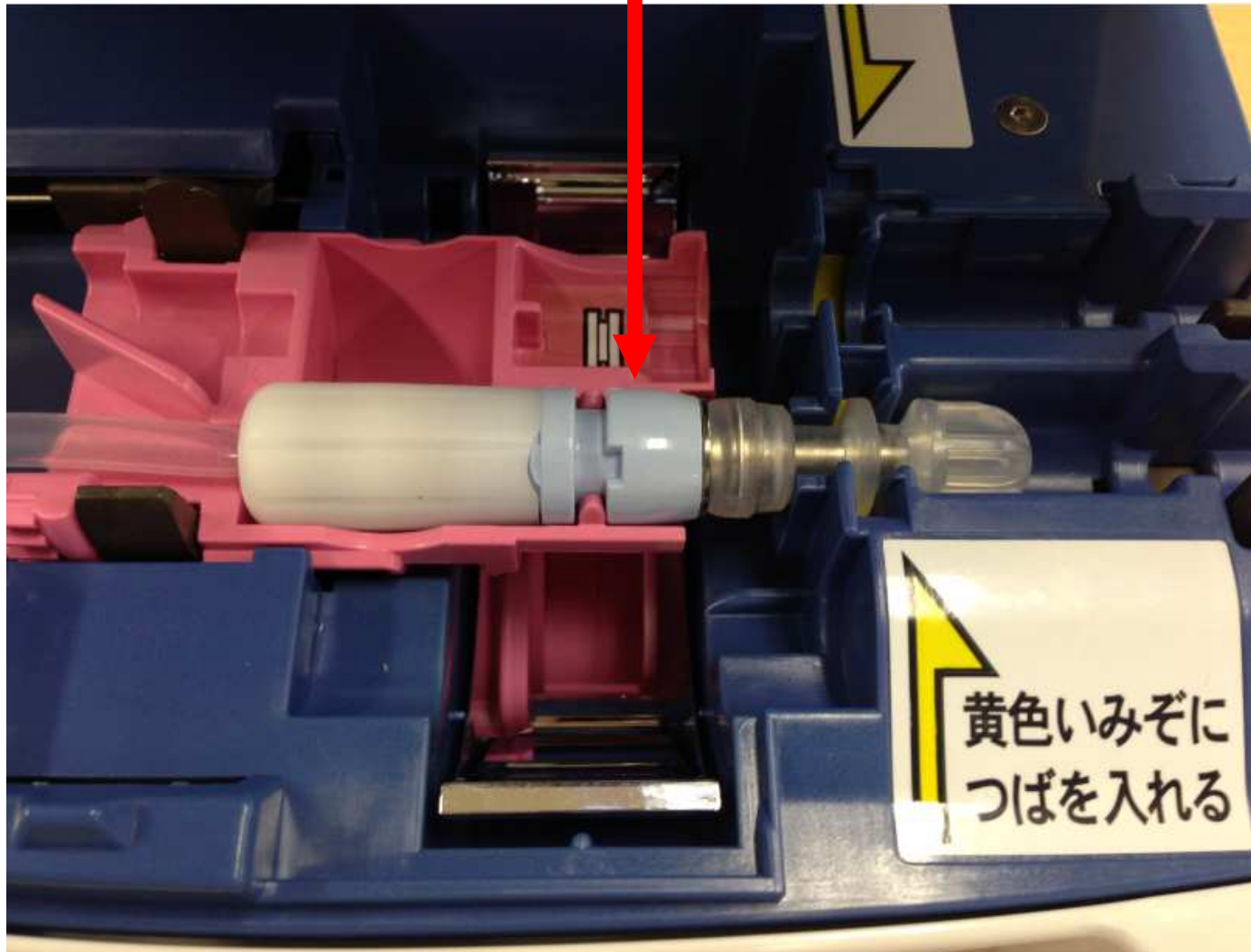

②⑩奥に液のつばの部分を入れる

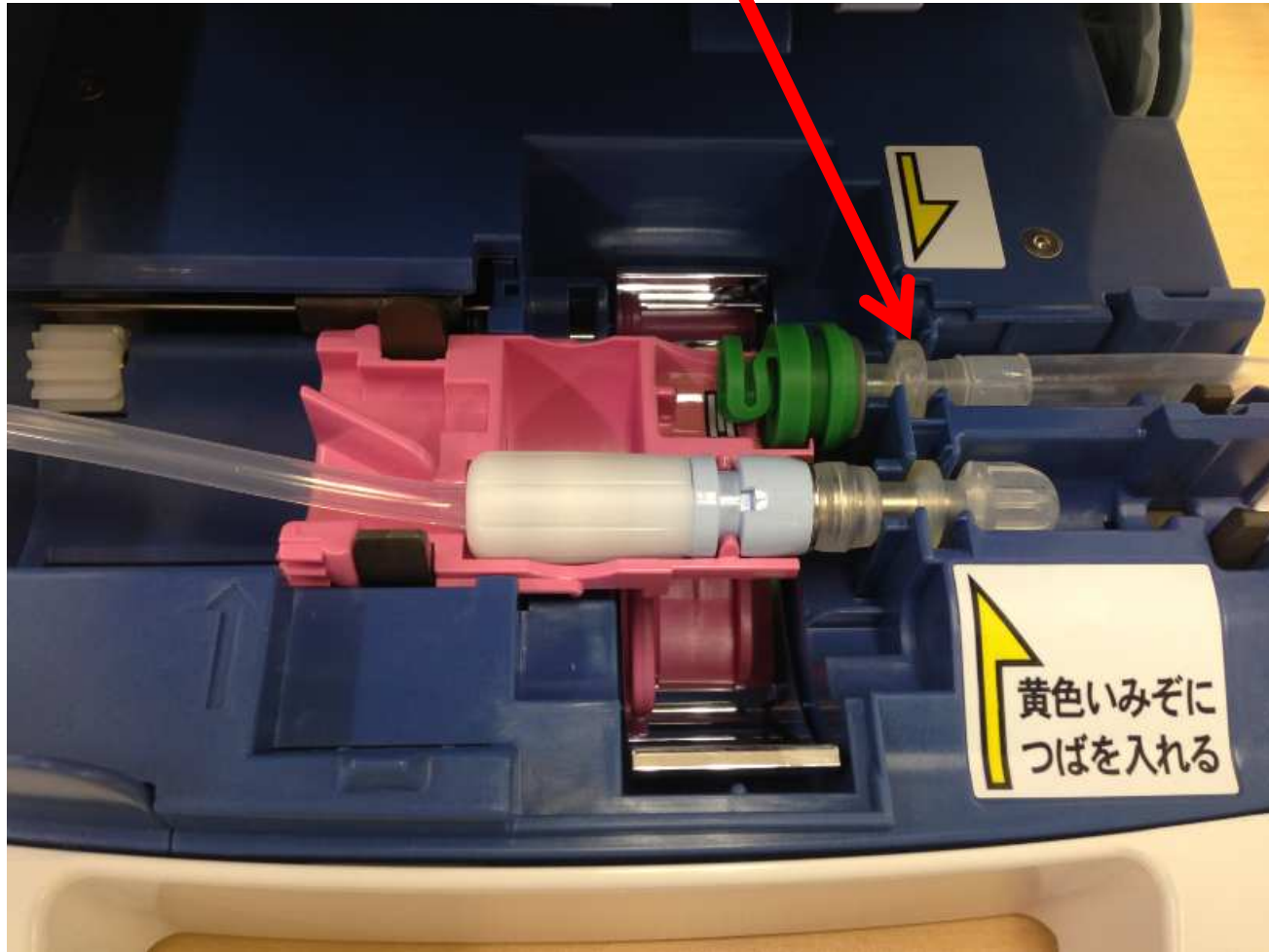

②1 フタを閉じると照射が始まる




表示が変わる



完了までいったら
次のページへ

22

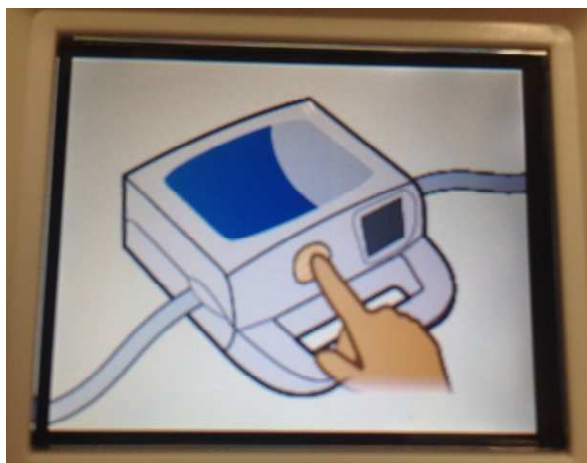


の表示を確認し

フタを開けて手前のキャップを捨てる



②③ お腹のチューブを上を持ち上げて外す

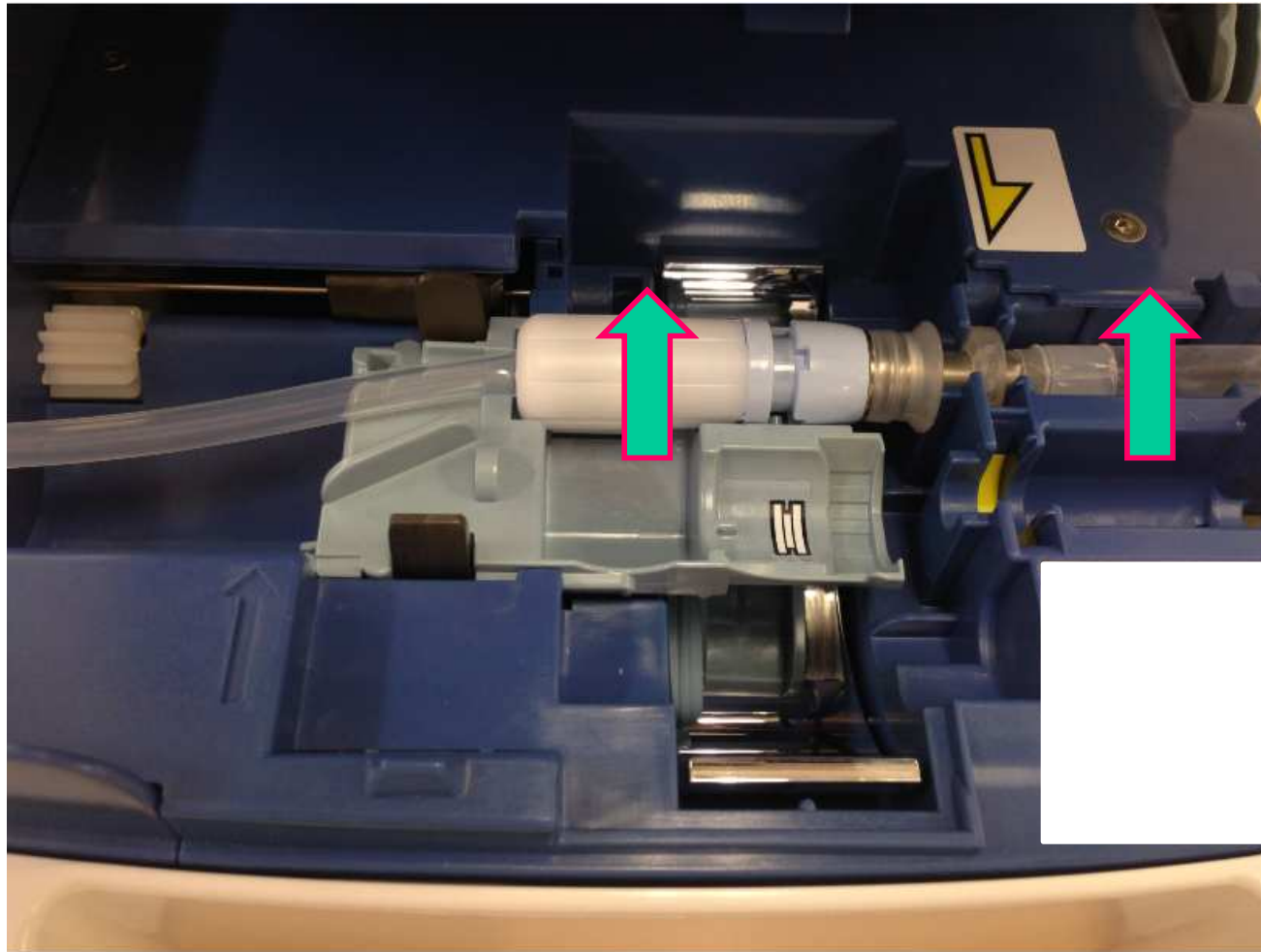

②④ 緑のカバーをつける



②⑤フタを閉じると電源が切れる


排液

②⑥ 白いクランプを開ける



排液

②7 お腹のチューブのクランプを回して開ける

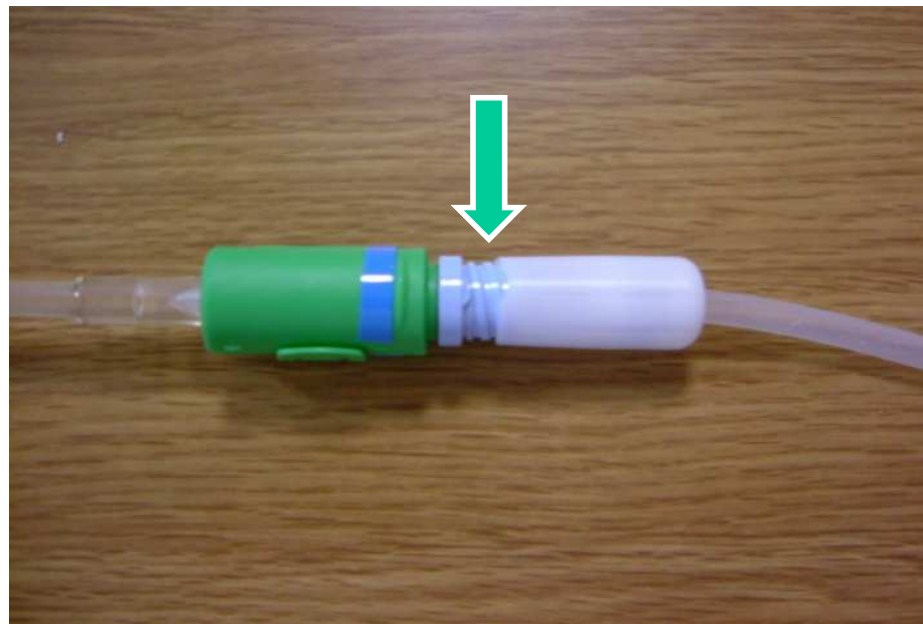


排液の開始時間を確認する

排液

②⑧ 現在排液中


おなかの液をだしている

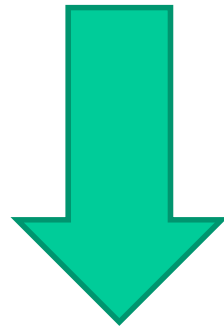

液がでなくなるまで待つ

液が出なくなったら

②9 お腹のチューブの クランプを回して閉める

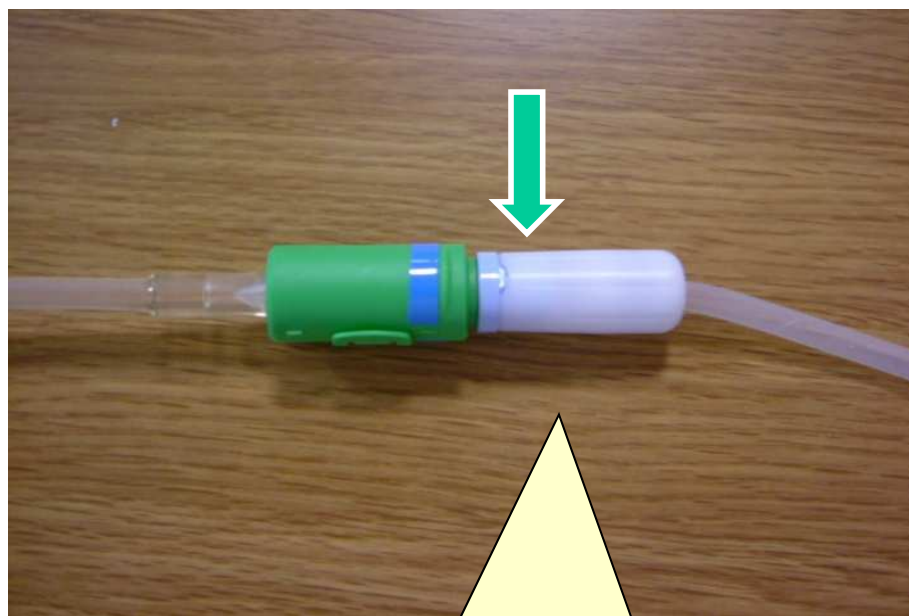

カチッと
音がするまで
閉める

③⑩ 白のクランプを閉める



排液の終了時間を
確認しノートに記入する

③1 排液の色を確認し量を測定・記録



こんな時は

白く濁っていたらすぐに
病院に電話をしましょう



③② 排液ノックをかごに戻す



プライミング

③③ 透析液を

保温カバーから取り出し
みどりの部分を折る

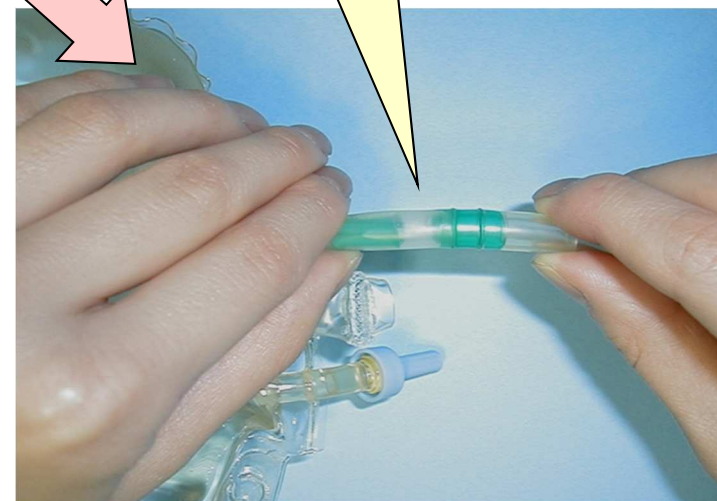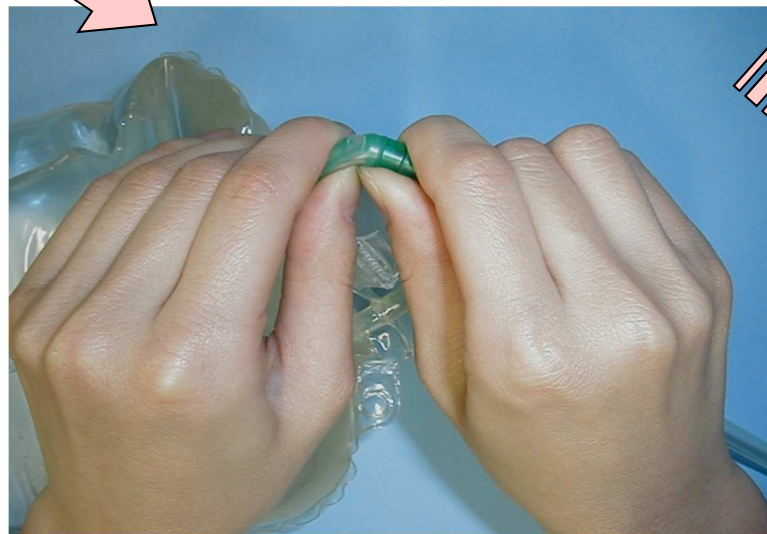


5mm位
開ける

③④ 液の量を量る




③⑤ 白と青のクランプを開ける

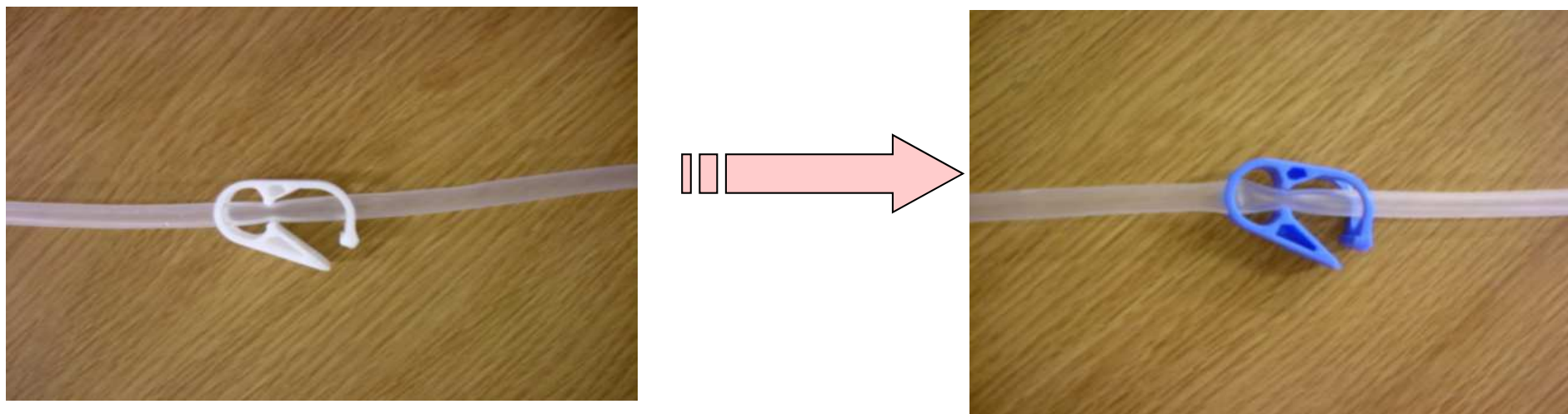



クランプを開いたら
すぐ次ページへ

③⑥ チューブを指でポンポンとはじき
チューブの空気を流し、
決められた量まで液を流す

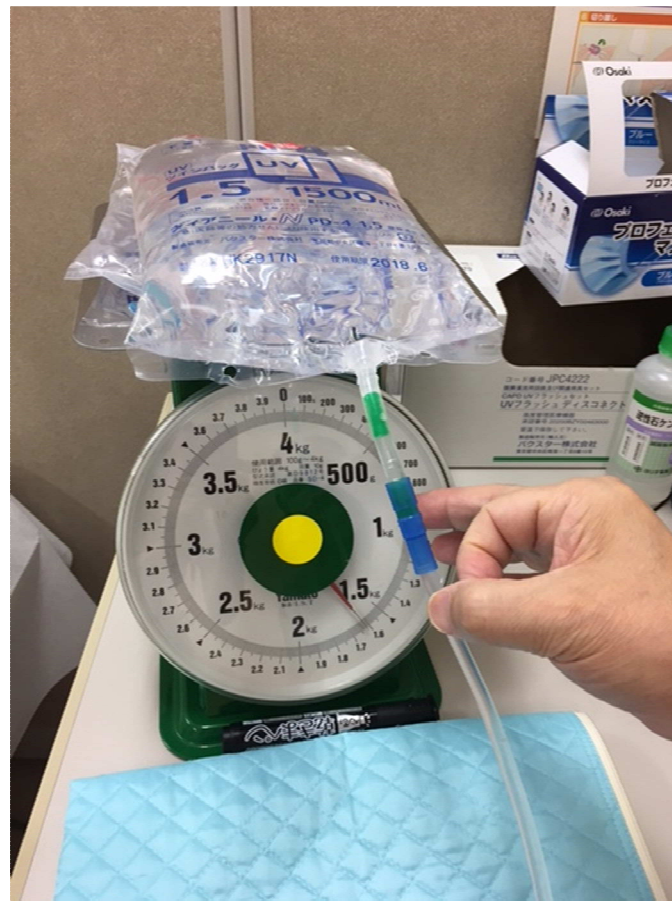

決められた量になったら

③7 青と白のクランプを閉じる

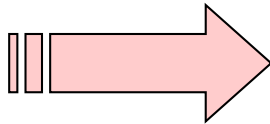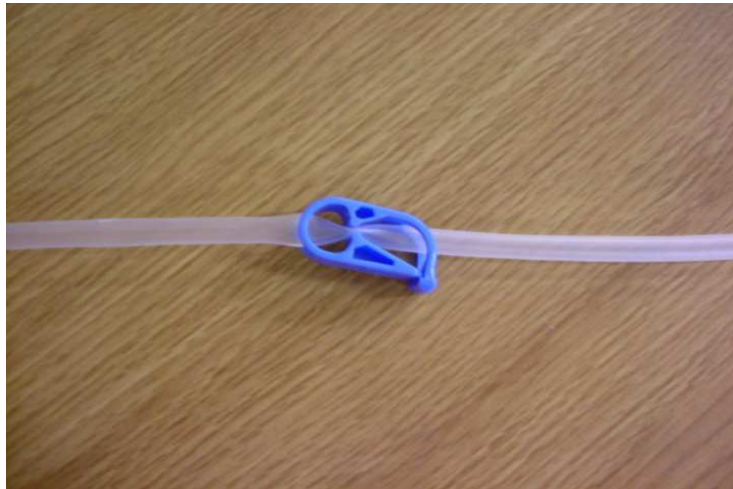


③⑧ 液をスタンドの上部に掛ける




注液

③9 青のクランプ開ける

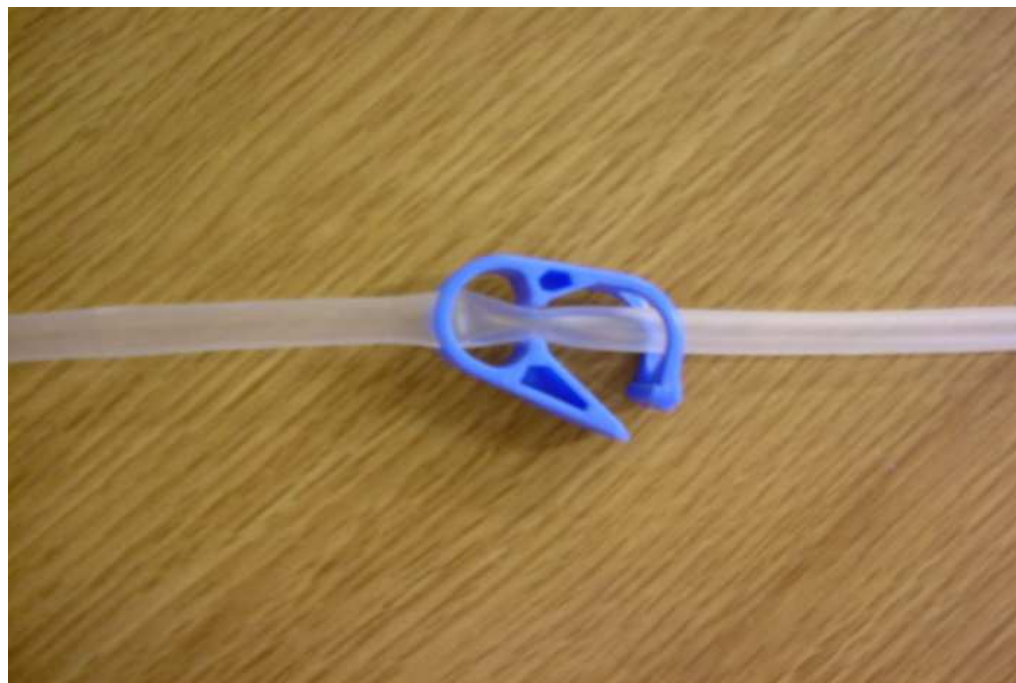

注液

④④お腹のチューブのクランプを
回して開ける

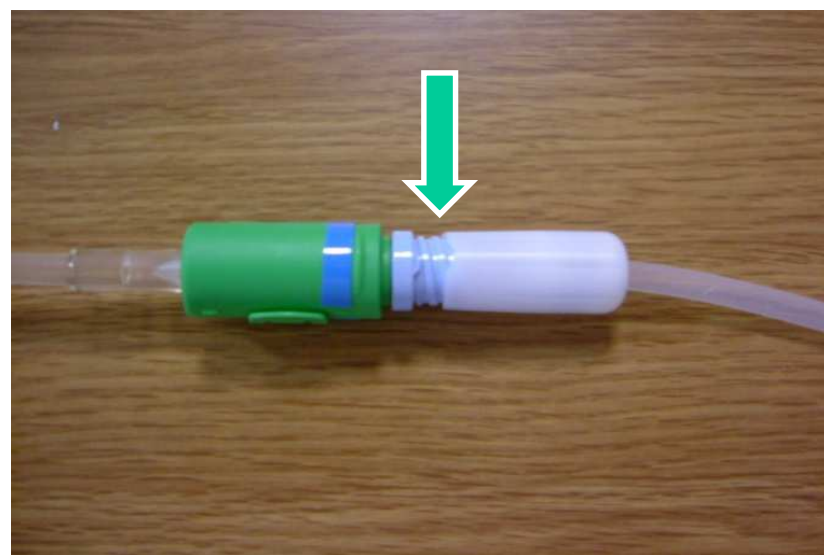


注液開始の時間を見る

注液

④1 現在注液中


おなかに液を入れている

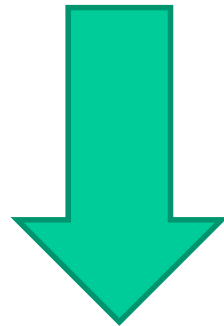

液が入るまで待つ
入ったら次のページへ


液が全部入ったら

④2 お腹のチューブの
クランプ回して閉じる

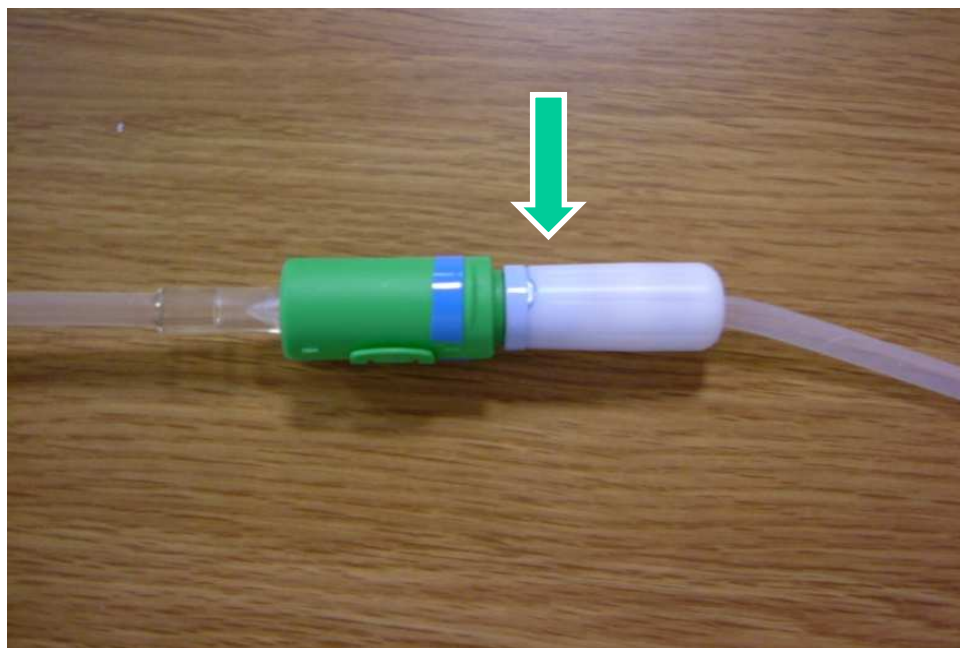

液が全部入りき
たら

④3 青のクランプを閉じる

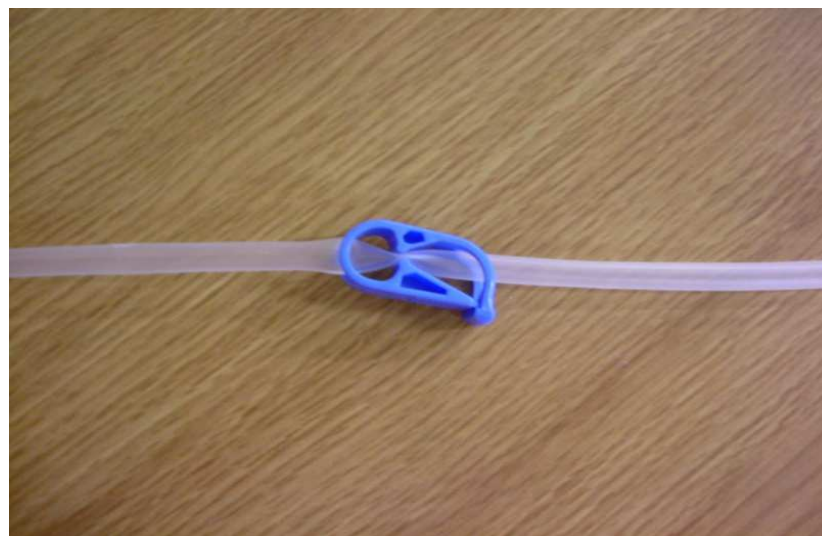

注液終了の時間を見る

44

袋を机の上におく

袋をおいたら

次ページへ



④5 緑色の保護カバーを外す



切り離し

④6 つなぐの電源を入れる

1秒以上
長押し




入れたら次のページへ

④7


この画面を確認して

すぐ、次へを1回おす

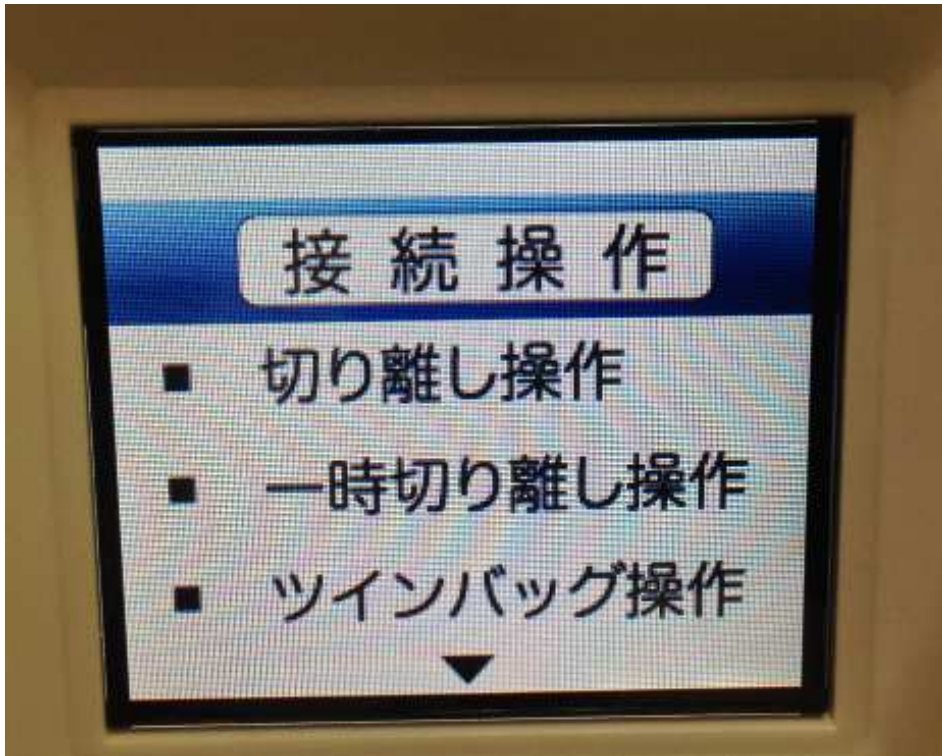

おしたら次のページへ

④8 切り離し操作の画面を確認

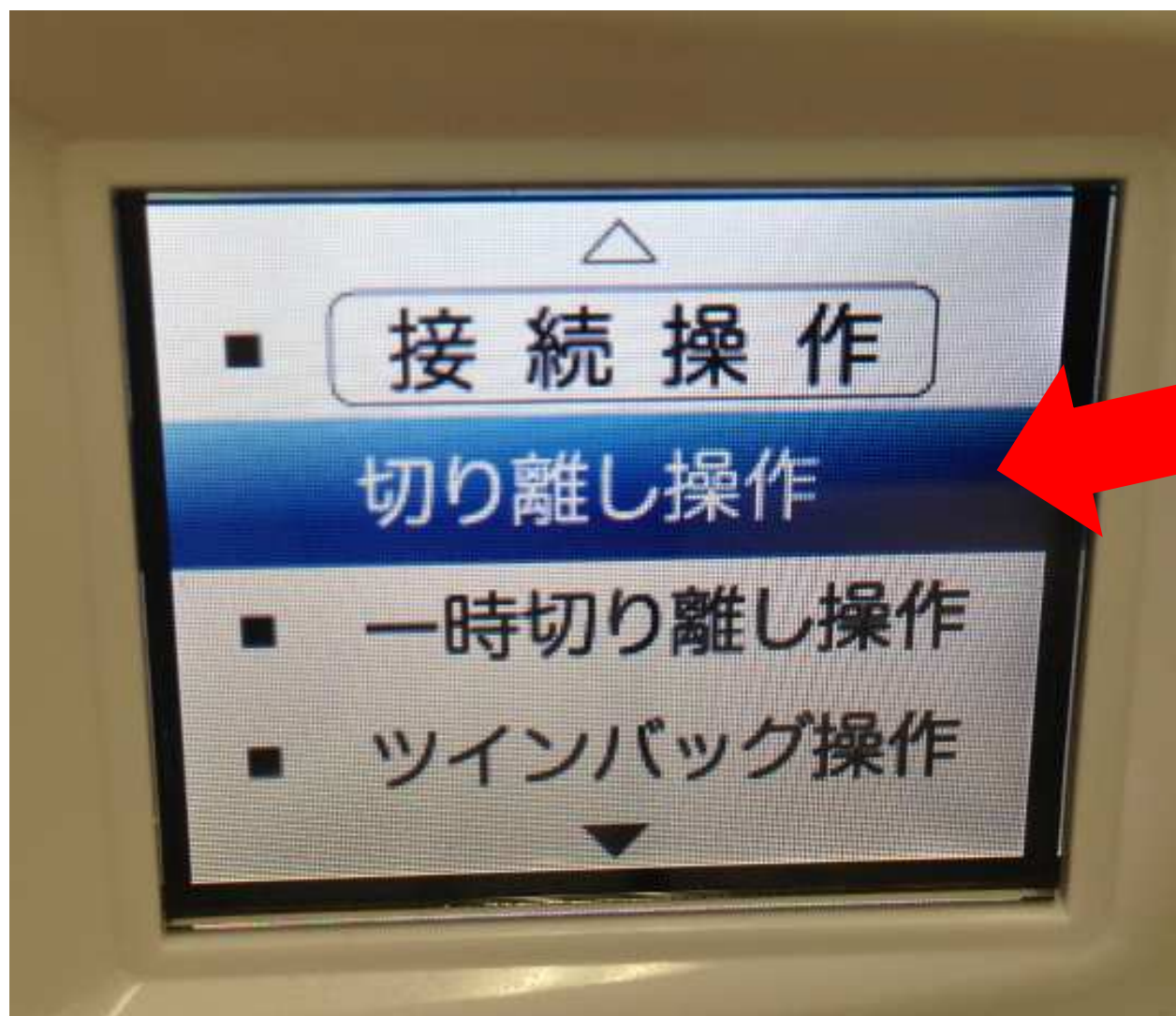

確認したら次のページへ

④9 手指のアルコール消毒をする



15秒ほど手に
擦り込む

※何かに触れた後も消毒を行いましょう

50



がでたらフタをあける




開けたら
次のページへ

⑤1 手前にお腹のチューブを入れる



⑤② 奥に新しいキャップを入れる

形をよく見る

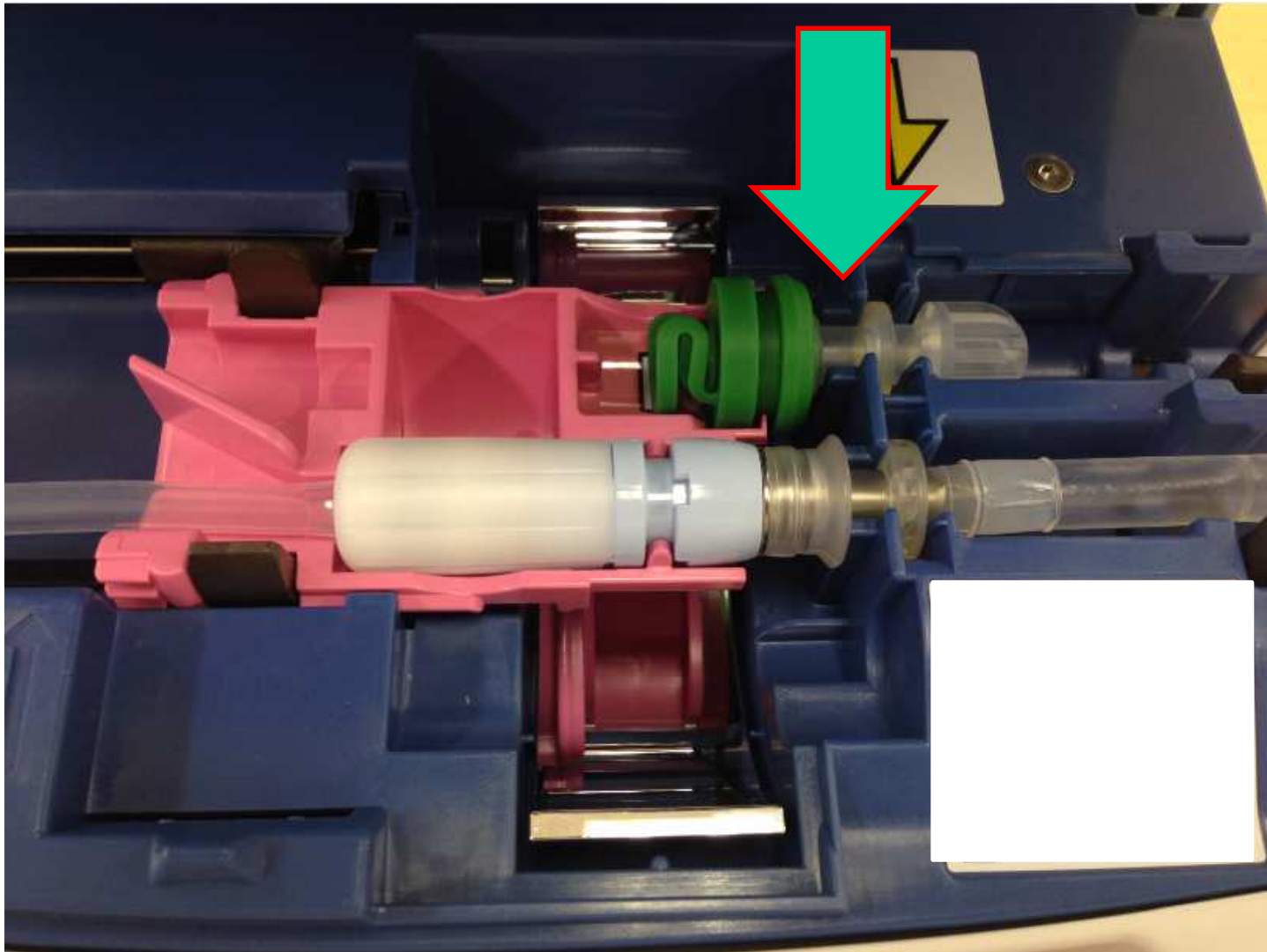


⑤③ フタを閉じて接続が終わるのを待つ

画面はこう変わる




完了までいったら
次のページへ

54

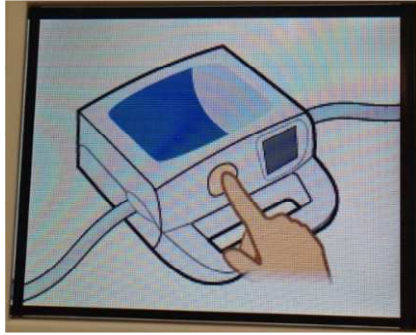


がでたら開けて

手前のチューブをはずす

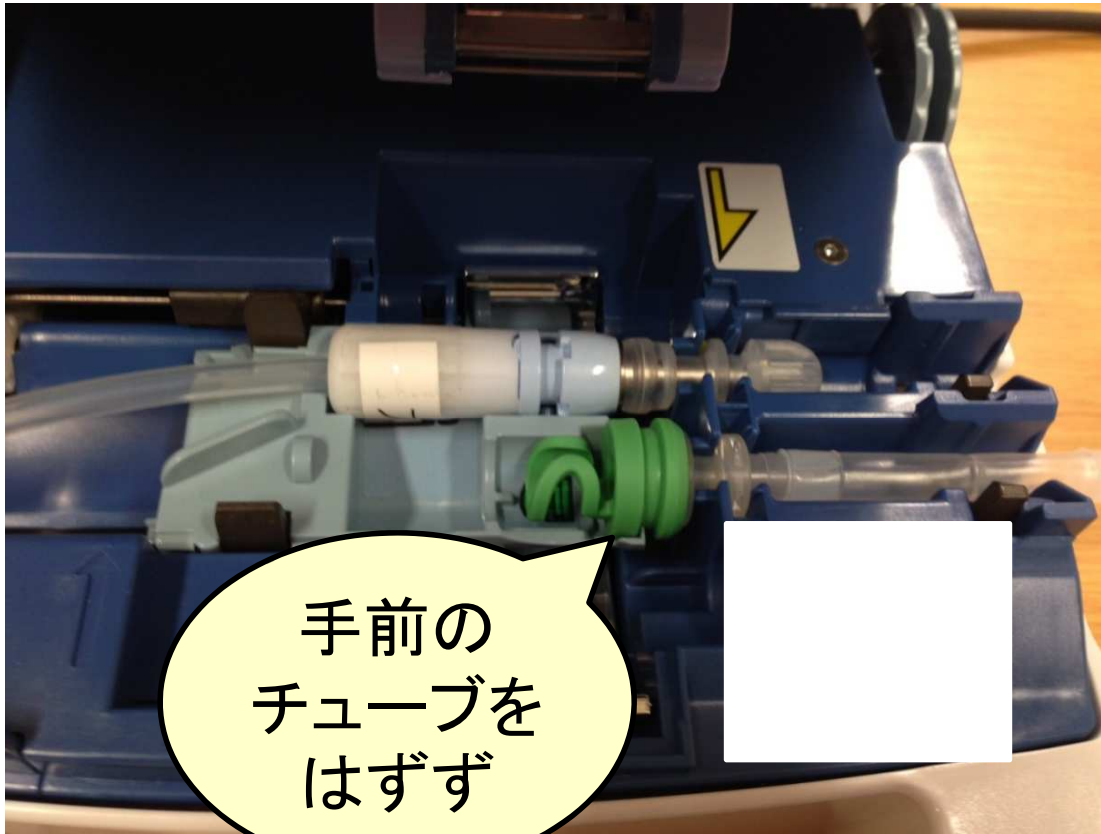

手前の
チューブを
はずす

⑤⑤ お腹のチューブを上を持ち上げて
外す

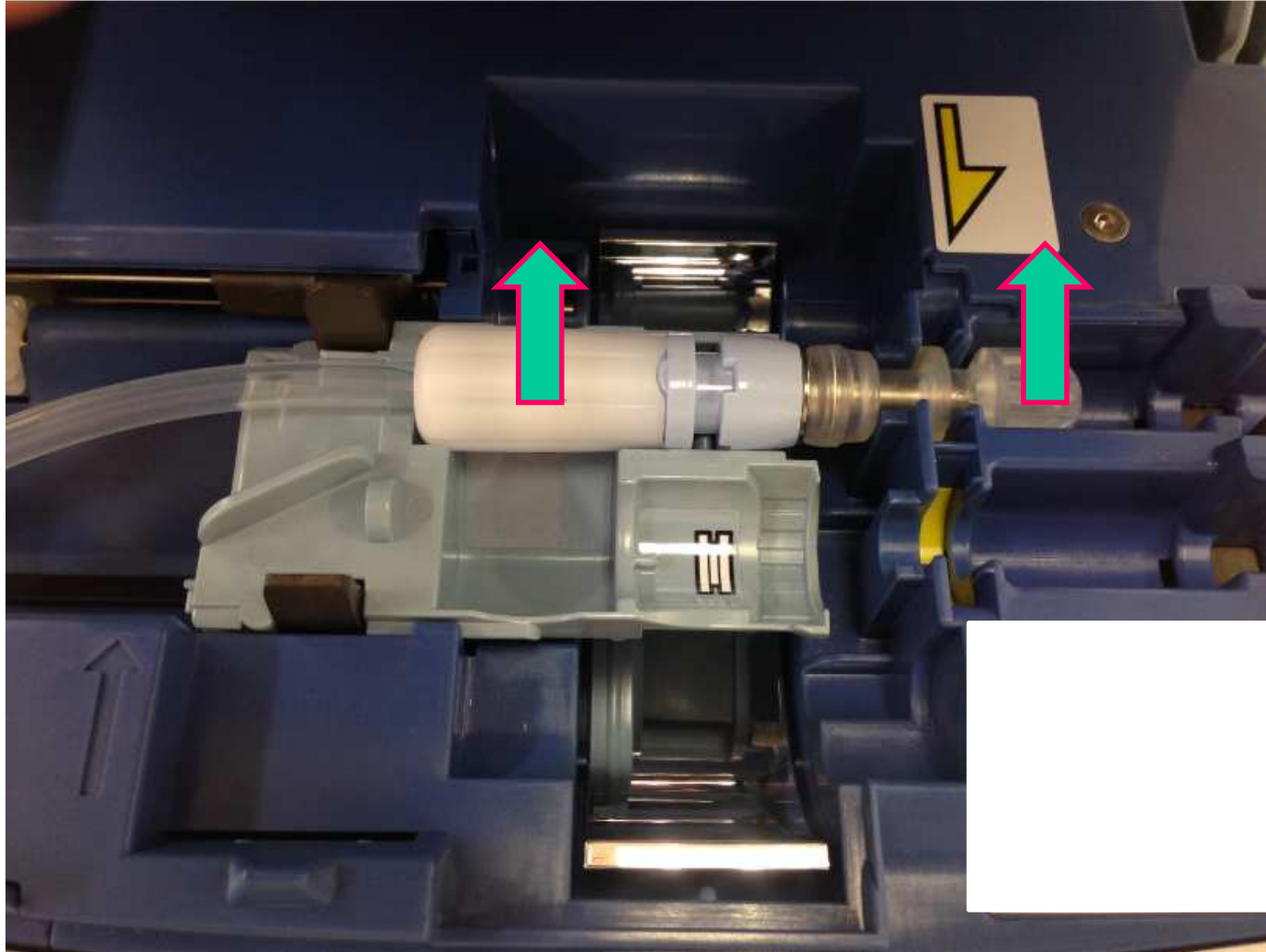

⑤6 緑色の保護カバーをつける



⑤7フタを閉じると電源が切れる

⑤⑧ チューブをまるめてお腹へ戻す



⑤9 すべて終了した事を確認する

⑥0 使用したバッグを片付ける

排液はトイレに
流して捨てる



お疲れ様でした